

# EKONOMIČNA LINIJA

## ZA VAŠU STOMATOLOŠKU PRAKSU

### NOVI APARATI U PONUDI TEHNODENTA !

Stomatološka radna mesta DTK

**DTK Denteck**



#### Stomatološko radno mesto

### DTK 892 PRO

#### Lekarski deo:

- Puster
- Turbinsko crevo Midwest
- Turbinsko crevo Midwest
- Luft motor
- Skidač kamenca sa 5 nožića
- Negatoskop

#### Asistentski deo:

- Vodena sisaljka
- Vazдушna sisaljka
- Puster
- OPCIJA: Led lampa

#### Vodena jedinica:

- Sistem destilovane vode
- Mogućnost prebacivanja na vodovodnu mrežu
- Bojler za toplu vodu

#### Reflektor:

- LED 7.000 – 32.000 lux
- Četiri led diode

Multifunkcionalna nožna papuča  
Terapeutska stolica

**OPCIJE: intraoralna kamera, led lampa za polimerizaciju i električni mikromotor sa svetlom**



#### Stomatološko radno mesto

### DTK 896



#### Lekarski deo:

- Puster
- Turbinsko crevo Midwest
- Turbinsko crevo Midwest
- Luft motor
- Skidač kamenca sa 5 nožića
- Negatoskop

#### Asistentski deo:

- Vodena sisaljka
- Vazдушna sisaljka
- Puster
- OPCIJA: Led lampa

#### Vodena jedinica:

- Sistem destilovane vode
- Mogućnost prebacivanja na vodovodnu mrežu
- Bojler za toplu vodu

#### Reflektor:

- LED 7.000 – 32.000 lux
- Četiri led diode

Multifunkcionalna nožna papuča  
Terapeutska stolica

**OPCIJE: intraoralna kamera, led lampa za polimerizaciju i električni mikromotor sa svetlom**



#### Stomatološko radno mesto

### DTK 898



#### Lekarski deo:

- Puster
- Turbinsko crevo Midwest
- Turbinsko crevo Midwest
- Luft motor
- Skidač kamenca sa 5 nožića
- Negatoskop

#### Asistentski deo:

- Vodena sisaljka
- Vazдушna sisaljka
- Puster
- OPCIJA: Led lampa

#### Vodena jedinica:

- Sistem destilovane vode
- Mogućnost prebacivanja na vodovodnu mrežu
- Bojler za toplu vodu

#### Reflektor:

- LED 7.000 – 32.000 lux
- Četiri led diode

Multifunkcionalna nožna papuča  
Terapeutska stolica

**OPCIJE: intraoralna kamera, led lampa za polimerizaciju i električni mikromotor sa svetlom**



- Elektromagnetni ventili za kontrolu nasadnih instrumenata
- Prevencija bakteriološke kontaminacije filterom
- LED reflektor - rotacija 360 stepeni, ručke se mogu lako skloniti i sterilisati.
- Keramička fontana sa rotacijom 260 stepeni koja se može skloniti, lako sterilisati.
- Inteligentni displej na dodir sa 12 memorija


## Stomatološko radno mesto

### DTK 899

- Elektromagnetni ventili za kontrolu nasadnih instrumenata
- Prevencija bakteriološke kontaminacije filterom
- LED reflektor - rotacija 360 stepeni, ručke se mogu lako skloniti i sterilisati.
- Keramička fontana sa rotacijom 260 stepeni koja se može skloniti, lako sterilisati,
- Inteligentni displej na dodir sa 12 memorija
- Multifunkcionalna nožna kontrola
- Nova asistentska jedinica sa ekranom na dodir
- Super komforni i ergonomični kožni tapacirung

- Ergonomski dizajnerski optimalan komfor
- Danski "Linak" Električni motor
- LED reflektor sa senzorom
- Okvir stolice napravljen od aluminijuma dovoljno jak za teške pacijente
- Odvojena kutija za jedinicu kako bi mašina bila stabilnija

- Novi element za stomatologa, jasno označene funkcije instrumenata i stola, tastatura na dodir koja olakšava rad doktora.
- Keramička fontana koja se lako skida sa mogućnošću sterilizacije.

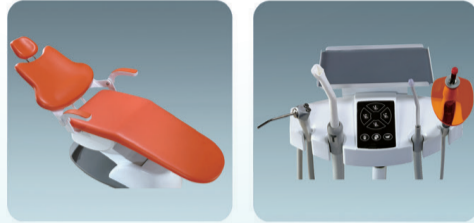

## VELIKI IZBOR KOMPRESORA DTK

Odličan kvalitet, prihvatljiva cena!



DTK - 800 - KOMPRESOR  
Kompresor za jedno radno mesto

- Zapremina boce: 45 L
- Zaštićena boca od rđanja
- Agregat sa dva cilindra
- Buka: 58 db
- Napajanje: 230V / 50Hz
- Snaga motora: 840W
- Dimenzija: D400 x Š 400 x V 655 mm



DTK - 1500 - KOMPRESOR  
Kompresor za dva radna mesta

- Zapremina boce: 55 L
- Zaštićena boca od rđanja
- Dva agregata sa dva cilindra
- Buka: 64 db
- Napajanje: 230V / 50Hz
- Snaga motora: 840W x 2 = 1640W
- Dimenzija: D 650 x Š 400 x V 650 mm

## icanCLAVE<sup>®</sup>

Focus On Autoclave



Specijalizovani za proizvodnju i distribuciju bezbednih autoklava i opreme za sterilizaciju.

Svi naši autoklavi su prošli kontrolu i ispunili sve standarde kvaliteta za sterilizaciju.

Autoklavi su praktični, zahtevaju minimalni prostor što ih čini idealnim rešenjem za sterilizaciju u malim klinikama kao što su stomatološke, veterinarske, kozmetičke, podijatrijske i mikrobiološke laboratorije.

#### Odlične performanse:

- Potpuno automatski stoni autoklav sa unapred podešenim programima.
- U skladu sa evropskim standardom EN13060.
- Radi vrlo tiho.
- Ugrađeni nezavisni parni generator osigurava brze cikluse sterilizacije.
- Brzo vakuumsko sušenje nakon sterilizacije.
- Sa jednim rezervoarom za tekuću vodu i jednim rezervoarom za korišćenu vodu.
- LCD ekran prikazuje vreme, temperaturu i pritisak, upozorenje o procesu.
- Korisnički interfejs.
- Višejezični meni.

#### Bezbednost i monitoring:

- Dvostruki sistem sigurnosne zaštite sprečava pokretanje ciklusa ako vrata nisu pravilno zaključana.
- Ovaj sistem takođe sprečava otvaranje vrata ako pritisak unutar komore nije jednak atmosferskom pritisku izvan komore.
- Sigurnosni ventil pod pritiskom sprečava prekomerni pritisak u komori i generatoru pare.
- Napajanje se automatski prekida ako dođe do kratkog spoja ili električne greške.
- Sposoban da otkrije i identifikuje tačan uzrok bilo kog problema i da korisniku izda određeni kod greške.
- Glavni prekidač nivoa vode u rezervoaru koji kontrolise minimalan i maksimalan nivo vode.
- Automatsko upozorenje za održavanje.

#### Dokumentacija:

- Štampač (opcija): spoljni štampač nije obavezan za sve autoklave D „icanclave“.
- USB port: koristi se za povezivanje USB stik, svi podaci o sterilizaciji automatski se zapisuju na USB stik i mogu biti spremni direktno na bilo kom računaru i elektronski arhivirani.

## Autoklav - ICANCLAVE D D218/D223 (klasa B)

Stoni autoklav klase B sa pre i post vakuumom, različite veličine komore 18 litara i 23 litara. Uključeno elektronsko sigurnosno zaključavanje vrata, dostupan spoljni štampač. Automatski autoklavi koji su jednostavni i brzi za upotrebu.

Narudžbeni KOD	ICANCLAVE D218	ICANCLAVE D223
Broj modela	STE-18-D	STE-23-D
Dimenzija komore	Ø247x350 mm	Ø247x450 mm
Zapremina komore	18 L	23 L
Broj tacni	3/ Max. 5	3/ Max. 5
Materijal tacni	Aluminijum	Aluminijum
Veličina tacni	192x285mm	192x380mm
Snaga	2000W	2200W
Dimenzija (Š x V x D)	490x455x600 mm	490x455x690 mm
Težina	47 kg	53 kg

Program	Temperatura [-C]	Pritisak [Mpa]	vreme sterilizacije [min.]	
Čvrsto	134	210	4	
	121	110	20	
Tečnost	134	210	10	
	121	110	30	
Pakovanje	134	210	10	
	121	110	30	
Tekstil	134	210	10	
	121	110	30	
PRION	134	210	18	
Sušenje	-	-	-	1-20
B&D TEST	134	210	3,5	
HELIX TEST	134	210	3,5	
VACUUM TEST	-	-	-	15-20



## Autoklav - ICANCLAVE D208Q (klasa B)

Autoklav D208Q „klase B“ ima program za BRZIM CIKLUSOM. Potrebno je približno vreme od 10 do 17 minuta za neupakovane instrumente u zavisnosti od težine punjenja. Odlično rešenje za hitnu sterilizaciju.

Narudžbeni KOD	ICANCLAVE D208Q
Broj modela	STE-8-D
Dimenzija komore	Ø170x320 mm
Zapremina komore	8 L
Broj tacni	Standard 2/ Max. 3
Materijal tacni	Aluminijum
Veličina tacni	130x265mm
Napajanje	220/110V, 50/60Hz
Snaga	2200 W
Dimenzija (Š x V x D)	420x370x525 mm
Težina	37 kg

Program	Temperatura [-C]	Pritisak [Mpa]	Vreme sterilizacije [min.]	Vreme ciklusa [min.]
Brzi ciklus	134	210	4	14
Pakovani	134	210	10	22-40
	121	110	30	38-50
PRION	134	210	18	35-55
Sušenje	-	-	-	-
B&D TEST	134	210	03	20
HELIX TEST	134	210	03	20
VACUUM TEST	-	-	-	17-20



## Autoklav - ICANCLAVE T218/T223 (klasa B)

ICANCLAVE T218 / T223 su autoklavi sa najboljim performansama iz porodice ICANCLAVE sa inovativnim tehnološkim dizajnom u Evropi. Veličina komore od 18 Litara i 23 Litara.

Narudžbeni KOD	ICANCLAVE T218	ICANCLAVE T223
Broj modela	STE-18-T	STE-23-T
Dimenzija komore	Ø250x350 mm	Ø250x450 mm
Zapremina komore	18 L	23 L
Broj tacni	4	4
Materijal tacni	Aluminijum	Aluminijum
Veličina tacni	192x285 mm	192x380 mm
Napajanje	220/110V, 50/60Hz	220/110V, 50/60Hz
Snaga	1750 w	1750 w
Dimenzija (Š x V x D)	483x450x635 mm	483x450x635 mm
Težina	50 Kg	53 Kg

Program	Temperatura [-C]	Pritisak [Mpa]	Vreme sterilizacije [min.]	Vreme u celosti T218/T223
Brzi S	134	210	4	11-15min / 15-20min
STANDARD B	134	210	4	30-49min / 38-57min
SOFT B	121	110	20	38-54min / 46-62min
PRION B	134	210	18	37-52min / 45-60min
B&D TEST	134	210	03	28-35min
HELIX TEST	121	110	30	28-35min
TEKSTIL	134	210	03	28-35min
VACUUM TEST	-	-	-	20-25min
Uklanjanje kamenca	-	-	-	približno 40 minuta



### Dodatne performanse:

- Ekran osetljiv na dodir.
- Sa brzim ciklusom, najbrzim ciklusom za samo 15 minuta
- Odloženi početak omogućava korisnicima da programiraju ciklus sterilizacije tako da se ciklus može izvoditi i van radnog vremena.
- Ručno punjenje vode i automatsko punjenje vodom.
- Tri različita svetlosna signala.
- Uključen ciklus uklanjanja kamenca.
- Dostupan za povezivanje sa Icanlable SPRT za štampanje nalepnice za bar kodom.

## Pakerica ICANSEAL



Jednostavna mašina za pakovanje koja ima maksimalnu širinu lepljenja od 300 mm.

Icanseal je jednostavan i pouzdan uređaj za pakovanje koji se lako koristi. Ima širinu šava za lepljenje od 12 mm, koristi se za rolne za sterilizaciju maksimalne širine 300 mm. Tokom postupka pakovanja, delovi zasebnih pakovanja se mogu iseći iz rolne.

Snaga	100W
Napajanje	230V, 50-60Hz
Širina rolne za sterilizaciju	12mm
Veličina pakovanja	500x400x210mm, 7KG
Maksimalna sirina lepljenja	300mm
Akcesorija	1 port kabl, 1 kabl za struju
Papir	Termalni papir, 1 rolna veličine: 57mm
Brzina prenosa podataka	100

## Printer ICANPRINT

Spoljni štampač za štampanje zapisa o sterilizaciji kompanije ICANCLAVE.

Koristi se za ICANCLAVE koji nemaju interni štampač.

Pogodno za klinike ili bolnice koje žele da se proces sterilizacije direktno štampa.

Dodatni kabl koristi se za povezivanje Icanprinta sa autoklavima ICANCLAVE.



## Ultrasonični skidači kamenca VRN

Nova linija i veliki izbor skidača kamenca!



### Skidač kamenca K08B

- Drška sa crevom
- Funkcije: Skidanje kamenca & Perio

Nožić skidača kamenca G1\*2, G2\*1, G4\*1, P1\*1



### Skidač kamenca K08A

- Skidajuća drška
- Funkcije: Skidanje kamenca & Perio

Nožić skidača kamenca G1\*2, G2\*1, G4\*1, P1\*1



### Skidač kamenca K08DL

- Skidajuća drška sa LED svetlom
- Funkcije: Skidanje kamenca & Perio & Endo

Nožić skidača kamenca G1\*1, G2\*1, G4\*1, P1\*1, E1\*1



### Skidač kamenca **VRN-A8**

- Skidajuća drška sa LED svetlom
- Nezavisno snabdevanje vodom
- Bežična kontrola
- Funkcije: Skidanje kamenca & Perio & Endo

Baterije sa nožnom kontrolom 1.5Vx2  
Nožić skidača kamenca G1\*1, G2\*1, G4\*1, P1\*1, E1\*1

## VRN LED LAMPE ZA POLIMERIZACIJU

### VRN – V300 LED lampa za polimerizaciju



### VRN – V200 LED lampa za polimerizaciju Visok intenzitet!

#### Opcija: Tri nivoa snage!



Specifikacija LED lampe za polimerizaciju

	V 200	V 300	VAFU
Baterija	DC 3.7V, 2200mAh	DC 3.7V, 2200mAh	DC 3.7V, 2200mAh
Intenzitet svetla	900-1650 W/cm2	900-1100 W/cm2	1600, 2400, 3200 W/cm2
Radno vreme	3s, 5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s	3s, 5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s	1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s
Režim osvetljenja	Puna snaga, progresivno, pulsirajuće	Puna snaga, progresivno, pulsirajuće	Puna snaga, progresivno, pulsirajuće
Tip	Bežična	Bežična	Bežična

### VRN – VAFU LED lampa za polimerizaciju

Glava se može rotirati 360°  
50% veća površina sočiva 78 nm  
Lampa ima izuzetno malu glavu visine 11,8 mm.  
Ugao otvaranja usta je samo 11°.


#### Višestruko proširenje funkcija:

- Nastavci za preciznu polimerizaciju kompozita ili vestibularnih faseti.
- Nastavci za izradu-polimerizaciju konveksnih aproksimalnih kontaktnih tački.
- Nastavci za preciznu polimerizaciju u endodontskim procedurama gde je potreban tanak snop svetla.


#### Dve funkcije:

- LED svetlo za polimerizaciju
- Karijes detektor – ljubičasto svetlo koje omogućava detekciju karijesa i plaka.

Multiple functions expansion

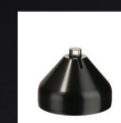

Point Cure Lens

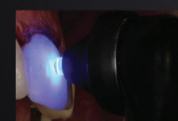

For pinpoint curing of small composites or tack curing veneers.




Proxi Cure Ball Lens



For building convex proximal contacts.



Endo Guide Lens

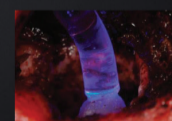

For endodontic procedures, including apical retrofills and other cases where a narrow light guide is needed.

### Servisna mreža

#### Novi Sad

**Tehnodent doo**  
Rakovačka 7  
Tel.: +381 21 6432 183  
Fax.: +381 21 6431 906

**Eliks dental**  
Zdravka Čelara 100, 21410 Futog  
Tel.: +381 21 892 955  
Mob.: +381 64 117 1002

#### Beograd

**Tehnodent doo**  
Nebojšina 33  
Tel.: +381 11 3981 837  
Fax.: +381 11 3981 823

#### Niš

**Alf Dent**  
7 jula 38  
e-mail: info@alfdent.rs  
Mob.: +381 64 308 0583



**TEHNODENT**