



TEHNODENT



2018  
**KATALOG**

[www.sakota.biz](http://www.sakota.biz)



## POTROŠNI MATERIJALI

- Izbeljivači i kozmetika
- Protetika
- Restaurativa, adhezija, preventiva
- Anestetici
- Dezinfekcija
- Endodoncija
- Jednokratni i pomoćni materijali
- Instrumenti

## NOVO - SISTEMI ZA SNIMANJE - IMAGING

- PaX-i3D Smart
- PaX-i2D
- EzRay Premium
- EzSensor

## STOMATOLOŠKA RADNA MESTA

- ESTETICA E70 Vision
- ESTETICA E80 Vision
- ESTETICA E50 life
- PRIMUS 1058 life
- ESTETICA E30
- Terapeutske stolice
- Reflektori

## STOMATOLOŠKI INSTRUMENTI

- Turbine
- Kolenjaci i nasadnici
- Mikromotori
- Multiflex kuplunzi

## INSTRUMENTI ZA PREVENCIJU

- PROPHYflex 3 2018
- SONICflex nastavci
- Prophyflex perle i prah
- AIR-FLOW® MASTER
- AIR-FLOW® MASTER PIEZON
- AIR-FLOW® S1 i S2
- AIR-FLOW® PREMIUM, PLUS i PERIO
- AIR-FLOW® HANDY
- AIR-FLOW® Prah
- PIEZON® LED
- PIEZON® MASTER 700
- PIEZON® 250 i 150

## STOMATOLOŠKI APARATI

### HIRURGIJA

- MASTERSurge
- EXPERTsurge
- Hirurški instrumenti

### ODRŽAVANJE OPREME

- QUATTROcare PLUS 2124 A
- QUATTROcare sprej
- Kavo ulje 500ml
- Dekaseptol GEL
- Oxygenal 6

### STERILIZACIJA

- Autoklav Faro SK07 - klasa B
- Destilator Droppy S
- Pakerice za pakovanje instrumenata SL13 i Sella II
- Ultrazvučna kadica
- Separator

### KOMPRESORI I SAUGERI

SAUGERI: DURR I CATTANI  
KOMPRESORI: DURR, CATTANI I EUROCOMPRESS  
MIKROSKOP KAVO - LEICA M320







Kutija za folije  
185,00



Opalescence Zubna pasta za negu nakon izbeljivanja  
1.000,00



Opalescence PF 16% i  
10% Regular Refill (4x1,2ml)  
3.130,00



Opalescence GO 6%  
8.860,00





Otisne mase BONASIL A+

Bonasil A+ PUTTY 400gr.+400 gr. **3.850,00**  
 Bonasil A+ LIGHT 50 ml x 2 ili Bonasil A+ REGULAR 50 ml x 2 **2.630,00**

**6.480,00**

AKCIJA-popust 10 % = **5.800,00**




Otisne mase BONASIL (C-TYPE)

BONASIL PUTTY 900ml **1.580,00**  
 BONASIL LIGHT BODY 140ml **850,00**  
 BONASIL ACTIVATOR PASTE 60ml **810,00**

**3.240,00**



BRIGHT FLOW CORE DC  
 UNIVERSAL DENTIN  
 Kompozitni materijal za nadogradnje  
**3.040,00**

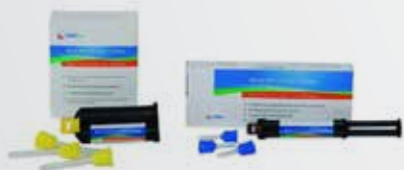

BRIGHT TEMPORARY C+B 75g  
 Samopolimerizujući kompozitni materijal za izradu privremenih nadoknada  
 AKCIJA - 10% = **7.100,00**



AQUA MERON -Glass ionomer cement a 35g  
**8.050,00**



UFI GEL P -set za meko podlaganje proteza  
**15.050,00**




STRUCTUR 2 SC a 75g  
 Samostvrdnjavajući materijal za izradu privremenih krunica i mostova  
**10.600,00**



PROVICOL tube 2x25g  
 Cement za privremeno cementiranje sa kalcijum hidroksidom  
**4.050,00**



Alginat Alginplus a 453g Major  
**650.00**

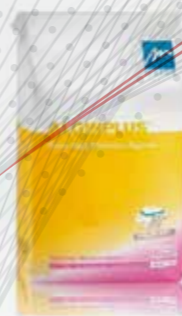

Alginat CROMATIC 453g  
**650.00**



Alginat ALGINMAX a 453 Major  
**650.00**



Alginat HYDROGUM a 453g  
**940.00**



Hemostat 15 ml - hemostatik (Retrargin)  
**650,00**



Alginat ORTHOPRINT a 500g  
**840.00**



Alginat TROPICALGIN 453g  
**850.00**



Alginat 453 g  
**800,00**



Akriat R tecnost 50 ml. **400,00**  
 Akriat R prah 80 g. **600,00**



Optosil P plus a 1kg Heraeus  
**1,920.00**



Xantopern VL plus a 140ml Heraeus  
**1,000.00**



Xantopern L plus a 140ml Heraeus  
**1,000.00**



Aktivator pasta a 60ml Heraeus  
**1,050.00**



Aktivator tečni 25 ml Heraeus  
**1,050.00**



I-pac N 50gr+30gr fosfatni cement normalvezujući  
**700,00**



ELIT HD+ PUTY 250ml+250ml  
**6,370.00**



ELIT HD LIGHT BODY 2X50ML  
**3,750.00**



Harvard cementi - 100 gr + 40 ml  
**2.500,00 + 1.400,00**



ZETA PLUS KOMPLET  
**4,090.00**



ZETA PLUS a 900ml Oranwash a 140ml  
**2.304,00**


Konac za retrakciju gingive 254cm  
**1.400,00**



PROTESIL PUTTY BASE 1,5kg  
**2.020,00**



PROTESIL AKTIVATOR GEL  
**750,00**

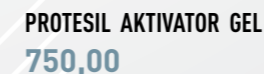

PROTESIL LIGHT  
**840,00**



Roze vosak Collegewax a 500g  
**860.00**



MB Wax roze vosak a 450g  
**700.00**







**IONOSEAL**  
Glas jonomer za podloge u tubi a 4g  
4.720,00



**CALCIMOL**  
Kalcijum-hidroksid pasta 13g +11g  
2.680,00



**CALCICUR**  
Kalcijum-hidroksid pasta u špricu a 2,5g  
3.750,00



**ADMIRA**  
Set kompozitnog materijala 3x4g  
19.900,00



**ADMIRA 4g**  
Ormocer® za kavitete klase I do V  
AKCIJA 3.200,00



**NANOCERAM BRIGHT FLOW**  
Nanohibridni tečni kompozit (2g x 2 kom)  
2.330,00



**IONOSEAL**  
Glas jonomer za podloge u špricu a 2,5g  
4.820,00



**CALCIMOL LC**  
Svetlosno polimerizujuća kalcijum-hidroksid pasta u špricu a 2,5g  
2.680,00



**BIFLUORID 10**  
Lak za zaštitu zuba a 4g  
10.360,00



**BRIGHT LIGHT MICROHYBRID 4.5g**  
Mikrohbridni univerzalni kompozit  
AKCIJA - 1.000,00



**BRIGHT LIGHT MICROHYBRID KIT A**  
Set od 4 tube mikrohbridnog kompozita  
AKCIJA - 5.000,00



**BRIGHT LIGHT 7 SYRINGE KIT**  
Set od 7 tuba mikrohbridnog kompozita  
AKCIJA - 7.000,00



**BRIGHT CAVITY LINER 2g**  
Kompozitni materijal za podloge  
1.520,00



**PIT & FISSURE SEALANT 2g**  
Zalivač fisura sa fluorom  
2 x 2g 2.530,00 din



**BRIGHT LIGHT FLOW**  
Mikrohbridni tečni kompozit (2g x 2 kom)  
2.020,00



**NANOCERAM-BRIGHT 4g**  
Nanohibridni univerzalni kompozit  
AKCIJA - 1.500,00



**NANOCERAM-BRIGHT INTRO KIT A**  
Set od 4 tube nanohibridnog kompozita  
AKCIJA - 6.800,00



**NANOCERAM-BRIGHT 7 SYRINGE KIT**  
Set od 7 tuba nanohibridnog kompozita  
AKCIJA - 11.000,00

## Remin Pro - tuba 40 gr

Zaštitna zubna pasta sa fluoridom i hidroksi apatitom.

1.700,00

### Indikacije:

- Posle beljenja
- Posle profesionalnog čišćenja
- Prevencija i kontrola hipersenzitivnosti
- Tokom ortodontskog tretmana

### Prednosti:

- Sadrži fluorid, hidroksi apatit i ksilitol
- Obezbeđuje balansiranu oralnu floru i time štiti zube od kiselina
- Ojačava zube nakon beljenja i profesionalnog čišćenja
- Kariostatska svojstva iz sadržaja ksilitola
- Dostupan u tri aromatična ukusa (dinja, mente i jagoda)
- Može se koristiti svakodnevno i posebno pogodno za upotrebu kod kuće
- Jednostavna aplikacija



## Easy Glaze 5 ml

Nano svetlosno-polimerizirajući zaštitni lak za zaštitu površine.

6.200,00

### Indikacije:

- Zaptivanje površina glasonomernih cementa, privremenih krunica i mostova i definitivnih kompozitnih restauracija
- Zaštita površine glasonomernih cementa od efekata vlage i dehidracije odmah nakon postavljanja
- Zaptivanje glasonomernih cementnih build-up restauracija pre uzimanja otiska
- Zaptivanje i zaštita adhezivnih interfejsa između restauracije i strukture zuba

### Prednosti:

- Sjajne i estetske površine
- Jednostavan za korišćenje
- Pruža zaštitu od diskoloracije
- U kombinaciji sa VOCC Ionofil Molar AC / Quick:
- Štiti od vlage i dehidracije odmah nakon punjenja
- Fluorescentna poput zuba
- Prirodni sjaj



## Twinky star flow 2 gr i u kapsulama 25x0,25

Svetlosno-polimerizujući kompozit sa sjajnim efektom u boji.

kapsula-460,00

pakovanje 25 kaps-10.800,00

spric 2 gr-4.650,00

### Indikacije:

- Restauracija mlečnih zuba

### Prednosti:

- Osam atraktivnih boja sa sjajnim efektom
- Jednostavna i brza aplikacija
- Izvanredno poliranje
- Baziran na osnovu dokazane kompozitne tehnologije VOCC
- Ključ za boju sa originalnim materijalom
- Roditelji mogu lakše motivisati decu za posetu kod zubara



## Ionolux prah/tečnost (12 g+ 5 ml) i kapsule(20 kom)

Svetlosno-polimerizirajući, akrilatnom modifikovani glasonomer sa estetikom sličnom kompozitima.

prah/tečnost-10 000,00

kapsule- 9 800,00

### Indikacije:

- Restauracije klase III i V, prvenstveno cervikalne nadoknade i karijes korena
- Restauracija mlečnih zuba
- Mala punjenja klase I
- Privremene nadoknade
- Izgradnja patrljka
- Podloge ispod ispuna

### Prednosti:

- Kompozitna estetika
- Ne lepi se za instrument, lako se oblikuje
- Odlučna translucencija
- Visok nivo fluorida
- Visoko radiopaktno
- Biokompatibilan







Cleanic pasta za poliranje a 100g Kerr  
1,750.00



Spectra pasta za poliranje 75gr  
Prevest  
600.00



Gradia a 4g Fuji  
4,100.00



I-PAK ULTRA Hemostatic Solution  
25%-20ml  
580,00



Citodur a 30g  
620.00



Provis a 40g Favodent  
540.00



EVETRIC 3,5 gr  
3,270.00



Herculite XRV a 5g Kerr  
2,500.00

I-ZOE N 40g+12g cement; Kariofil  
980,00



Amalgam MARVALLOY CAPS a 50  
3200,00/3800,00/4660,00



DMP SINGLE BOND 3ml  
Svetlosno polimerizujući adheziv  
AKCIJA - 860,00



DMP ETCHING GEL 3ml/10ml  
Kiselina za nagrizanje  
460,00 / 1.110,00



Tečnost za dehidriranje  
i odmaščivanje 30ml  
720,00



Jodoform prah 15gr  
Prevest  
1.330,00

## Voco Ionofil Molar prah/tečnost (15 g+ 10 ml) i kapsule (48 kom).

Glasjonmer cement za ispune.

prah/tečnost- 5 500,00/3 700,00  
kapsule - 12 500,00




### Indikacije:

- Restauracija klase I (bez okluzije)
- Dugoročna privremena restauracija klase I i II
- Kao podloga i za cementiranje kompozitnih materijala
- Restauracija mlečnih zuba
- Restauracije defekata V-oblika i erozije cervikalnog emajla

### Prednosti:

- Vrlo otporan na abraziju, kompresivna i poprečna čvrstoća
- Dobra adhezija za dentin i gled
- Vrlo izdržljiva punjenja
- Kontinuirano ostobađanje fluora
- Rendgenkontrastan
- Biokompatibilan
- Estetska translucencija kao kod prirodnih zuba

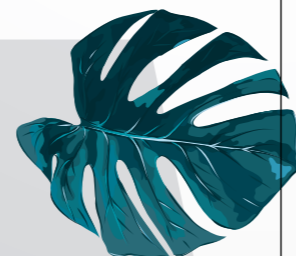

LIDOKAIN 2% adrenaline 50X2ml  
1,010.00



ORABLOC  
2,905.00



Clinell sprej za dezinfekciju a 500ml  
560.00



Clinell maramice za dezinfekciju a 200kom  
1,220.00



Clinell maramice za dezinfekciju a 40kom  
300.00





Lentule  
900,00



K-file, K-reamer, H-files x 6 kom  
600,00



Acroseal 8,5 gr- endodontski cement  
6.935,00



Mašinski proširivač gates / pesso  
1.700,00 / 1.600,00



Calcipast 2.1g Kalcijum hidroksid pasta za direktno i indirektno prekrivanje pulpe  
1.400,00



MTA +mini (3X0,14G +1ML) Preparat za retrogradno punjenje pri apikotomiji.  
3.300,00



Calcipast Forte 2,1g  
2.000,00



Endomethasone 14g + 10m  
6.350,00 + 3.400,00



PARCAN 3% sodium hypochlorite  
4.340,00



Gluco Chex 2% a 200g  
Tečnost za ispiranje kanala korena zuba  
1.100,00



CHLORAXID 2% 200g  
Natrijum-hipohlorit 2% za ispiranje kanala korena  
590,00



Citric Acid 40% a 200g  
Limunska kiselina 40% za ispiranje kanala korena  
1.100,00



AH plus jet  
9.890.00



Glyde file a 3ml  
1,960.00



ENDO solution 17% EDTA  
1.100,00



Dia Prep plus EDTA 6ml  
1.480,00



Glass fiber set  
8,700.00



Akritlatni kocici-crveni (60 komada)  
720.00



Parapulparni kocici TITANIUM a 12kom Nordin  
2,200.00



Golden screw posts a 60kom Nordin  
4,700.00

Vrhunski kvalitet!



Gutaperka poeni 15-40 a 120kom SURE-ENDO-GRADUISANI  
490.00



Gutaperka poeni 15-40 a 120kom SURE-ENDO  
380.00



Papirni poeni 15-40 a 200kom SURE-ENDO  
320.00



Papirni poeni 15-40 a 200kom SURE-ENDO-GRADUISANI  
370.00



AH plus 4ml+4ml  
13,600.00





Kompresse za pacijente A80  
AKCIJA - 900,00



Lanac za komprese - metalni  
i plastični  
510,00



Kompresse nesterilne 5x5/8  
slojeva a 100 kom  
220,00



Hirurške maske sa gumicom  
A50 (u boji)  
510,00



Plastične čaše - (200 kom)  
180ml  
220,00



Rukavice Nitril - (u boji)  
a 100kom  
770,00



Kutija za proteze  
100,00



Aplikatori za bond  
a 100 kom  
600,00



Rukavice latex sa puderom a  
100kom  
600,00



Film dentalni 3x4  
a 100kom / 150 kom  
3.470,00 /  
7.150,00



Razvijач dentalni koncentrat  
za 1l  
850,00



Fiksir dentalni koncentrat  
za 1l  
850,00



Četkice za bond  
a 25 kom  
200,00



Igla sve dimenzije  
a 100 kom  
280,00



Gumice za poliranje  
170,00



Četkice za ČJK  
120,00



Zubni tamponi a 500kom  
250,00



Artikulacioni papir pravi 80  
mikrona a 144kom  
900,00



Špric 2ml sa navojem i bez  
navoja a 100kom  
640,00



Stomatološka sisaljka A100  
260,00



Matrice Springclip 1.310 a 18kom TOR VM  
2,500.00



Set matrica a 100+2ključa 1.398 TOR VM  
5,530.00



Matrica u traci 7mm, 6mm, 5mm a  
3m 1.390 TOR VM  
450.00



Interdentalni kočići silikonski,  
a 40 kom TOR VM  
650.00



Hirurški konac 3/0 i 4/0 okrugla igla  
20mm a 1kom SMI  
187.00



Hirurški konac 3/0 i 4/0 trouglasta igla  
20mm a 1kom SMI  
187.00



Interdentalni kočići drveni  
a 200kom TOR VM  
1,200.00



Interdentalni kočići drveni (u boji)  
a 100kom TOR VM  
600.00



Set za poliranje 1.021  
48disc+75strips  
2,800.00



Kočiči elastični TOR VM a 40 kom  
1,550.00



Glass fiber post 1 a 6kom Nordin  
2,400.00



Šajbna za poliranje a 40kom TOR VM  
950.00



Šajbna za poliranje asortiman a 40kom  
TOR VM  
1,490.00



Poliester traka a 100kom 1.040  
TOR VM  
240.00



Poliester traka za poliranje 4mm a  
150kom Microdонт  
730.00



Čelična traka za poliranje 6mm a  
12kom Microdонт  
675.00



Igla za karpul  
(sve dimenzije) a 100kom  
1,160,00





Instrument za modelovanje  
amalgama WESTCOTT N° 2  
760,00




Držac skalpela N° 3  
660,00



Drske za ogledalce  
300,00



Stomatološko ogledalce  
(komad)  
120,00

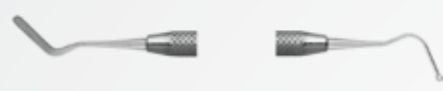


Instrument za modelovanje  
ispuna - šestica  
760,00




Nabijač i nosač  
760,00



Sonde  
400,00

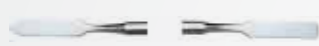

Špatula  
710,00

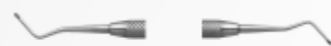

Ekskavatori  
860,00



Pincete  
800,00



Parodontalne kirete GRACEY  
1.160,00



Alveolarne kirete HEMINGWAY  
1.210,00



Parodontalna sonda 26 G N° 6  
510,00




Borer dijamant za turbinu Edenta  
300,00 - 350,00



Borer HM za kolenjak okrugli Edenta  
330,00-450,00



Borer HM za sečenje krunica Edentaa  
600,00

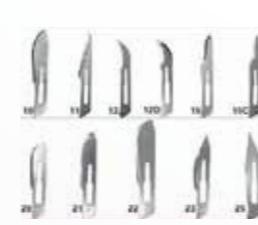

Skalpel nožić 11 a 1kom SMI  
10,00



Posuda za vaterolne sa 4 pregrade  
1.520,00



Endo Glass organizer  
1.000,00



Dispenser za plastične čaše -  
metalni i plastični: 85x85x360  
4.550,00



Držac vaterolni  
1.520,00



Četka za čišćenje  
instrumenata ručna  
POLIRAPID  
250,00



Endobox mini (u boji)  
104 X 44 X 54mm  
3,540.00



Endobox medium  
125 X 105 X 54mm  
10,120.00



Poklopac za tacnu za instrumente MAXI  
288 X 187 X 29 mm  
+ Tacna za instrumente MAXI  
2,200.00



Posuda za mešanje gipsa i alginata  
250,00



Špatula za alginat  
100,00



Kapen bočica / postolje  
520,00 / 864,00



Držac vate metalni  
1.820,00



Tacna za pregled  
860,00



Bubrežnjak 18 cm  
1,720.00



Iglodržač MAYO-HEGAR CM 16  
4,000.00



Iglodržač MATHIEU CM 14  
4,000.00



Držac za kuglice vate  
3,040.00



Držac borera 36 FG/RA + poklopac  
(aluminijumski)  
1,320.00 + 300.00



Držac borera 36 FG/RA + poklopac  
(plexiglas)  
1,010.00 + 300.00



Petri šolja 60 /80 / 100 /120 mm  
380/400/500/650,00



Poluge  
2.330,00



Kašike za uzimanje otisaka za totalnu  
protezu  
610,00



Kašike za uzimanje otisaka za pun  
zubni niz  
610,00



Makaze  
1.520,00



Držaci matrice  
1.670,00



Klešta za ekstrakciju  
4.710,00



# vatech

## PaX-i3D Smart




### PANORAMSKE SLIKE SA PROFESIONALNOM DIJAGNOSTIČKOM VREDNOŠĆU

PaX-i3D Smart pruža vrlo precizne i vrlo kvalitetne panoramske slike. Jasna i oštra panoramska slika donosi vam bolju dijagnostiku.

### MAGIC PAN (OPCIJA)

Značajno poboljšava kvalitet slike, naročito kod nepravilno postavljenih pacijenata kombinacijom segmenata više lejera (OPCIJA)

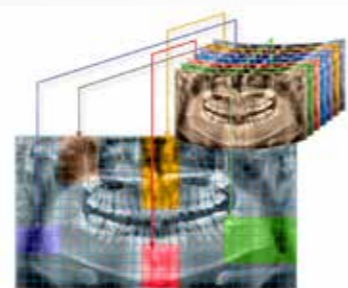

### PREMIUM IZBOR ZA IMPLANTOLOGA

#### 1 SCAN, 2 SLIKE

Jedno skeniranje pomoću PaX-i3D Smart vam daje ne samo CT sliku, već i Auto Pano sliku. To znači da pacijenti koji zahtevaju obe slike ne treba da prolaze dva skeniranja rendgenskim zracima. Takođe, slike CT i Auto Pano se prikazuju unutar funkcije One Viewer.

**Praktični 3 u 1 sistem**  
CBCT (sa Auto Pano), Panoramski, Cefalometrijski

**SMART inovacija za nisku dozu**

- 1 skeniranje, 2 slike
- Niska doza i visoki kvalitet slike

**SMART inovacija za preciznu dijagnozu**

- Anatomski FOV 12x9 (oblik luka)
- ART-V (artefakt redukcija)

### KARAKTERISTIKE

<b>Funkcija</b>	CT(sa Auto Pano) + Pano + Ceph	
<b>Fokalna Tačka</b>	0.5mm	
<b>CT - FOV veličina (cm)</b>	10X8.5 / 10X7	
<b>Voxel veličina</b>	0.2mm / 0.3mm	
<b>Vreme skeniranja</b>	CT	18.2sec
	Pano	13.6sec / 7sec [Opcija sa Mageic PAN]
	Ceph	Scan : 12.9sec, One-Shot: 0.7sec
<b>Gray Scale</b>	14bit	
<b>Napon Cevi/Struja</b>	50-90 kVp / 4 - 16 mA	

### KONFIGURACIJA

	CBCT	PANO	CEPH	
			SCAN	ONE SHOT
<b>PaX-i3D Smart</b>	•	•	-	-
<b>Pax-i3D Smart SC</b>	•	•	•	-
<b>PaX-i3D Smart OP</b>	•	•	-	•





# vatech PaX-i2D

VAŠ PARTNER U DIGITALNOM USPEHU

## NAPREDNO REŠENJE SLIKE ZA PANORAMSKU DIJAGNOSTIKU

Pax-i2D pruža vrlo preciznu i kvalitetnu panoramsku sliku. Jasna i oštra panoramska slika donosi vam bolju dijagnostiku.

<b>Superiorni kvalitet slike</b>	Optimalna slika za tačnu dijagnozu
<b>Dva ugrađena senzora</b>	Specijalizovani senzori za Pano & Ceph Ubrzan radni proces i produženi životni vek senzora
<b>Moderan i kompaktn dizajn</b>	Podignite vrednost vaše klinike Uštedite prostor u vašoj klinici

## DIJAGNOSTIFIKUJTE LAKO I EFIKASNO SA RAZLIČITIM MODOVIMA SLIKANJA

- Odrasli i deca
- Standardno, desno, levo i napred
- Ortogonalni
- Zagriz
- TMJ LAT Otvoreno / Zatvoreno
- TMJ PA Otvoreno / Zatvoreno
- Sinus LAT / PA



## NAPREDNO REŠENJE SLIKE ZA CEFALOMETRIJSKU DIJAGNOSTIKU

PaX-i pruža optimalne slike sa posebno dizajniranim senzorom za cefalometrijsku dijagnozu. Kako nudi dve veličine slike, LAT i Full LAT, možete odabrati jednu od njih na osnovu vaših dijagnostičkih potreba.



**LATERAL**  
Obezbedite specijalizovane visokokvalitetne slike koje odgovaraju ortodontskoj i maksilofacijalnoj hirurškoj dijagnostici (opciono).



**FULL LATERAL**  
Daje 30% veće slike pacijenta radi sveobuhvatne dijagnoze (opciono).



## KONFIGURACIJA

	PANO		CEPH	
			SCAN	ONE SHOT
<b>Pax-i</b>	•	-	-	-
<b>Pax-i SC</b>	•	•	-	-
<b>Pax-i OS</b>	•	-	-	•
<b>Pax-i OP</b>	•	-	-	•

## KARAKTERISTIKE

<b>Funkcija</b>	Pano + Ceph
<b>Vreme skeniranja</b>	Pano : 13.5 sec (HD) / Normal 10.1 sec Ceph : Scan 12.94 sec / One-shot 0.9 sec
<b>Fokalna tačka</b>	0.5 mm
<b>Napon cevi/Struja</b>	Pano : 50-90 Kvp / 4-10 mA
<b>Ceph FOV dimenzije</b>	SC : 21x23cm (8.3x9.1") [LAT, PA, SMV, Waters View, Carpus] 27x23cm (10.6x9.1") [Full LAT] OS : 23x25cm (9x10") [LAT, PA, SMV, Waters View, Carpus] OP : 30x25cm (12x10") [LAT, PA, SMV, Waters View, Carpus]
<b>Gray Scale</b>	14 bit
<b>Pozicija pacijenta</b>	Stajanje / pristup za invalidska kolica





vatech

Intraoralni rendgen - EzRay Premium

Praktičan i dizajniran za lako rukovanje jednom rukom  
4.7kg glava - za stabilno pozicioniranje  
Samo 2 klika za snimanje



Odvojiva kontrolna ploča  
2 godine garancije  
Sigurna i jasna slika

Pružna dijagnostičke vrednosti naprednom tehnologijom.

Fokalna tačka od 0.4mm stvara oštrije slike savršeno usklađene sa bilo kojim digitalnim intra-oralnim senzorom, PSP-om ili filmom koji koristite.

Jednostavan za korišćenje

Intuitivne ikone na LED ekranu

Optimizovana automatska podešavanja

EzRay Premium ima unapred programirana podešavanja za svaki zub. Jednim pritiskom na dugme automatski se optimizuju parametri snimanja kao što su površina slike i stanje pacijenta za svaki pojedini slučaj.

KARAKTERISTIKE

Fokalna tačka	0.4mm
Napon cevi	Podesivo 50 - 70kVp
Struja	4 - 7 mA
Vreme ekspozicije	Podesivo 0.04 - 2.0 sec
Dužina ruke	460, 600, 900 mm
Napon	100 - 230V ± 10%
Dodaci	Ručni prekidač za ekspoziciju
Konus za kolimaciju snopa	Okrugli 20cm (8") Opciono: Okrugli 30cm (12") Pravougaoni 20cm / 30cm (8" / 12")



Intraoralni RVG senzor - EzSensor

1. ULTRA-TANAK ZA LAKO POZICIONIRANJE

Tanak CMOS osigurava da pacijentu bude što udobnije.

Postavljanje i pozicioniranje senzora u usta pacijenta je i dalje izazov.

Tokom godina tehnologija digitalnog senzora je poboljšana kako bi se postigla udobnost pacijenta.

Centar za istraživanje i razvoj VATECH-a je ustanovio debljinu koja svodi na minimum neugodnost.

2. DIZAJNIRANO PREMA PACIJENTU

Dizajn zaobljenog ugla omogućava maksimalno udobno postavljanje prema mekim tkivima.

Pacijenti osećaju bol, jer delikatna oralna mukoza dobija pritisak iz tvrdog ugla senzora. Zaobljeni ugao može smanjiti taj bol. Ali ima mogućnost smanjivanja aktivne površine slike. Ovo je tehnologija koja održava savršenu ravnotežu između njih.

Ergonomski dizajnirani senzori u 3 različite veličine zadovoljavaju potrebe različitih slučajeva. Vatechova unikatna veličina senzora 1.5 odgovara skoro svim pacijentima.

3. POUZDANA SLIKA

EzSensor Classic pruža sliku za preciznu dijagnozu i planiranje tretmana.

EzSensor Classic pokriva širok opseg podešavanja ekspozicije, snimajući konzistentnu i dijagnostičku sliku.

Sa našim visoko osetljivim senzorom možete snimati dijagnostičke slike pod bilo kojim uslovima, čak i kada koristite stare Rentgen (X-Ray) izvore. Pacijenti mogu da iskoriste prednost manje radijacije.

Zahvaljujući visokom kontrastu, moguće je detaljno pregledati različite gustine (prozirnost). Sa slike lako možete uociti interproksimalni karijes.

Intraoralni RVG senzor - EzSensor Soft




EzSensor Soft je drugačiji !

Najmanja veličina piksela na svetu vam daje maksimalno precizne dijagnostičke slike  
Kod 14.8 µm, EzSensor Soft ima teorijsku rezoluciju od 33.7lp / mm.



OTPORNO NA PAD - TRAJNI MATERIJALI SENZORA

EzSensor Soft ima meku spoljašnjost! Gumeni spoljašnji izgled modela EzSensor Soft može izdržati spoljašnji udar ako se senzor ispusti, smanjujući rizik od oštećenja.

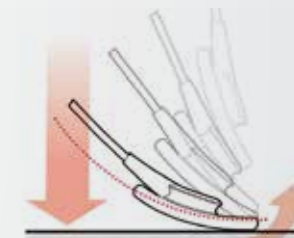

BEZBOLNO I LAKO POZICIONIRANJE

U poređenju sa rigidnim Intra-oralnim senzorima, nivo bola je smanjen za 40%.

Sa smanjenim bolom za pacijenta, osoblje će biti u stanju da precizno pozicionira Intra-oralni senzor u oblasti od interesa za dijagnozu.

KARAKTERISTIKE Intraorani senzori Classic i Soft

	Classic	soft, soft I
Detektor	CMOS	CMOS
Veličina piksela	29.6 µm	14.8 µm
Teoretska rezolucija	17 lp/mm	33.7 lp/mm
Dinamički opseg	12 bit	12 bit
Aktivna površina	Size 1.0 _ 20 x 30 mm Size 1.5 _ 24 x 33 mm Size 2.0 _ 26 x 36 mm	20.0 x 30.0 mm [1.0] 23.9 x 33.0 mm [1.5] 25.9 x 35.9 mm [2.0]
Dimenzije	Size 1.0 _ 25.4 x 36.8 mm (1.00 x 1.45 inch) Size 1.5 _ 29.2 x 39.5 mm (1.14 x 1.55 inch) Size 2.0 _ 31.3 x 42.9 mm (1.23 x 1.69 inch)	37.8 x 26.6 x 5.5 mm [1.0] 30.6 x 40.8 x 5.5 mm [1.5] 32.5 x 44.0 x 5.5 mm [2.0]
Debljina	4.8 mm (0.19 inch)	Materijal Silikon (biokompatibilni)
Dužina kabela	2.7 m	2.7 m



Kavo Stomatološko radno mesto

**ESTETICA E70/ E80 vision**

Vaše želje, naša inspiracija!

# KAVO

Dental Excellence

**Novi stomatološki aparat**

- Potpuno novi operativni koncept za brz i direktan pristup svim važnim funkcijama, za uštedu vremena i jednostavan radni proces

**Komunikacija sa pacijentom.**

- KaVo ERGOcam One, intraoralna kamera, najjednostavnija za upotrebu
- Novi ekrani visoke rezolucije: KaVo Screen HD u 22" i KaVo Screen One u 19"

**CONEXIO. Manje traženja. Više pronalazaka.**

- Sistemski softver CONEXIO, inteligentni interfejs podataka u vašoj praksi, podržava vam korisne funkcije i pristup relevantnim podacima o pacijentu u svako doba

**Higijena. Automatski. Integrisano.**

- Higijenski centar sa integrisanim, zamenljivim adapterom za creva za instrumente i aspiraciju za uštedu vremena, automatskim čišćenjem i dezinfekcijom

**Novi dizajn. Vidljivo moderno. Značajno elegantan.****Isprobana i testirana stolica.**

- Izbor novih boja
- Revidirani dizajn sa komponentama uređaja u modernoj beloj boji

**Hirurgija. Neograničeno. Integrisano.**

- Nova hirurška funkcija sa specijalnim malim i prikladnim, svetlosnim hirurškim motorima i integrisanom pumpom.



- Težina pacijenta do 180kg
- Ergonomski koncept (AGR-nagrada za ergonomiju)
- Reflektor KaVoLUKS 540 LED sa 5 zvezdica
- Pacijentsko pozicioniranje prema Trendelenburgu
- Optimalna najviša / najniža pozicija
- Novi prilagođeni naston za ruke
- Osetljiv touch displej za brzi pristup svim važnim funkcijama i informacijama.
- ESTETICA E80 Vizija: dodatno horizontalno praćenje i podizanje sedišta





**KAVO**

Dental Excellence

Kavo Stomatološko radno mesto

**ESTETICA E 50 life**

Osetite podršku stomatološkog aparata visokog kvaliteta koji optimizuje Vaše radne procedure!

- Anatomski dizajn stolice, produžena najviša / najniža pozicija
- Težina pacijenata max do 185 kg, optimizovana i mekana forma tapacirunga, sve komponente uređaja u modernoj stomatološkoj beloj boji
- Integrisani Trendelenburg pokret za udobnost pacijenta
- CONEXSIO sistemski softver
- Priprema instalacije za KaVo ERGOcam One, Kavo DIAGNOcam 2170 U i Leica stomatološki mikroskop M320, mogućnost ENDO funkcije
- Kontrola softvera sa doktorskog dela, Plug & Play za povezivanje novih uređaja
- Automatski backup podataka
- Novi Kavo ekran visoke rezolucije HD, 19" i 22"

**KAVO**

Dental Excellence

Kavo Stomatološko radno mesto

**PRIMUS 1058 life**

Dokazan kvalitet, pouzdan i prilagođen za svakog stomatologa!

- Dostupna u verziji sa visećim crevima i crevima od gore
- 20 multifunkcionalnih komandi
- Integrisani LCD displej
- USB CONEXIO sistem za pacijente
- Moderan i novi dizajn stomatološke stolice, visoka estetika, povećana izdržljivost težine do 185 kg
- Istovremeno se kreće gore i naginje
- Vaš asistent ima sve pod kontrolom zahvaljujući novom asistentskom delu
- Ergonomična i udobna nožna papuča Vam pruža mogućnost da se u potpunosti fokusirate na rad

**KAVO**

Dental Excellence


Kavo Stomatološko radno mesto

**ESTETICA E30**

Jednostavni sistem kreiran visokom tehnologijom!

- Mogućnost postavljanja na levu ili desnu stranu
- „SMARTdrive“ funkcija, kojom Vi stičete prednost
- Verzija „Table“ sa visećim crevima - KaVo ESTETICA E 30TM
- Verzija sa crevima - KaVo ESTETICA E 30 S
- Mek i udoban tapacirung omogućava odličan komfor pacijentima
- Laka, ergonomska upotreba
- KaVo multifunkcionalna nožna papuča Vam omogućava siguran i komforan rad



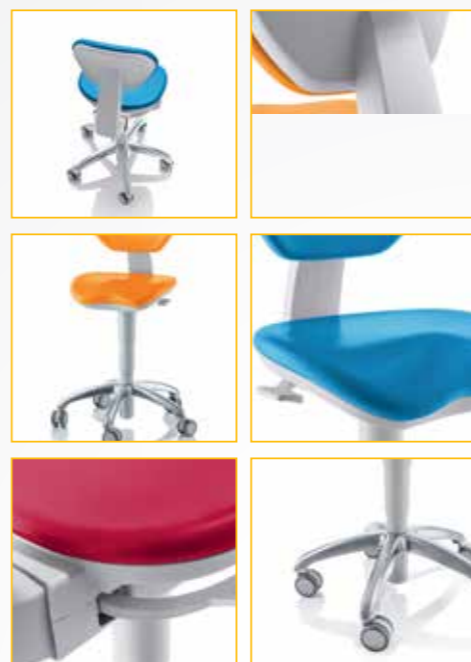

### Terapeutska stolica KaVo PHYSIO One

Za rad na opušteni način,  
morate sedeti ispravno!

Zahvaljujući i različitim mogućnostima podešavanja, radna stolica KaVo PHYSIO One prilagođava se brzo i jednostavno vašim individualnim potrebama

### Terapeutska stolica KaVo PHYSIO EVO

Savršeno se uklapa.  
Ergonomski dizajn!

Perfektna ergonomija sa maksimalnim komforom za zdravi rad bez zamaranja. Odličan koncept!

Terapeutskoj stolici KaVo PHYSIO Evo je dodeljen pečat odobrenja od strane Nemačke kompanije "AGR". KaVo PHYSIO Evo je nagrađen od strane nezavisne, multidisciplinarnе ekspertske komisije u skladu sa strogim kriterijumima u pogledu ispitivanja ergonomije i zdravlja.



Perfektni uslovi  
osvetljavanja!

### Kavo LUX 540 LED

Savršenstvo: KaVo LUX 540 LED svetlo za rad najvišeg mogućeg kvaliteta

- Do 40,000 Lux
- Precizno definisano svetlosno polje za rad sa svetlosno polimerizujućim materijalima
- COMPOsave Mode i individualan izbor boje svetla
- Praktična i udobna upotreba
- Dugovečnost uređaja i minimalna potrošnja energije
- Dodatna rotacija i zaključavanje po 3. osi



### Faro MAIA LED sa polužjem (75cm)

Idealno radno polje sa profesionalnim FARO LED reflektorima!

- Patentirani optički projektor sa reflektovanim svetlom stvara apsolutno ujednačeno svetlo, tačnu i realističnu boju tokom celodnevnog rada.
- Precizna linija reflektora uklanja odsjaj, štiti oči vaših pacijenata.
- Progresivna regulacija intenziteta svetlosti, od 3.000 do 35.000 Lux, da bi se obezbedila konstantna temperatura boje (jednaka 5.000 K), bez prevremene polimerizacije na svakom nivou svetlosti.
- Hlađenje bez ventilatora
- Dve LED diode
- Efekat redukcije senke
- Fokus 170x85mm
- Lako skidajuće ručke (ručke se mogu sterilisati na 134°C)
- Rotacija po dve ili opciono po tri ose





# Lako je otkriti!

Mi imamo rešenje kako bi vam olakšali svakodnevni rad!



## KaVo master

Uživajte u maksimalnoj snazi sa inovativnim KaVo komforom.



## KaVo expert

Ostvarite više sa pouzdanim KaVo performansama.



## KaVo smart

Radite bezbedno sa pristupačnim KaVo kvalitetom.

### Ergonomija

- Ergonomski oblik
- Mala glava (visina: 13,1 mm)
- 100 ° / 19 ° ugao glave / kolena
- Plasmatec površina
- Poboľšan dizajn glave (uslovi osvetljenja i vidljivosti)

### Snaga

- Sprej sa 4 mlaznice
- Velika snaga (23 W)
- Silence Technology: Tiha (57 dB (A))
- Pasivna kontrola pritiska
- Fleksibilne verzije kuplunga
- Direct Stop tehnologija: borer se zaustavlja u 1 sek.
- Zero back-suction / bez povratne sukcije usled rotacije

### KVALITET

- Snažna retencija ležajeva (do 32 N)
- MULTIflex kuplung - lako se menja
- Filter za vodu
- MADE IN GERMANY
- 24-mesečna garancija

### Ergonomija

- Ergonomski oblik
- Mala glava (visina: 13,8 mm)
- 100 ° / 19 ° ugao glave / kolena

### Snaga

- 4 mlaznice
- Velika snaga (18 W)
- Tiha (62 dB (A))
- Low back-suction
- Karbidni vodič rukava Carbide guide sleeve
- Fleksibilne verzije kuplunga

### KVALITET

- Snažna retencija ležajeva (do 32 N)
- MULTIflex kuplung - lako se menja
- Filter za vodu
- MADE IN GERMANY
- 18-mesečna garancija

### Ergonomija

- Ergonomski oblik
- Mala glava (visina: 14,5 mm)

### Snaga

- 4 mlaznice
- Velika snaga (16 W)
- Tiha (65 dB (A))

### KVALITET

- Snažna retencija ležajeva (do 32 N)
- MULTIflex kuplung - lako se menja
- MADE IN GERMANY
- 12-mesečna garancija



## MASTERtorque M9000 L

- DST (direct STOP) zaustavljanje borera za 1 sek
- rad bez vibracija (57 dB), snaga za sve preparacije 23W
- idealna kombinacija uglova (glava 100, koleno 19 stepeni) olakšava rad u teško pristupačnim područjima
- hlađenje sa četiri mlaznice, integrisani filter za vodu
- keramički KaVo kuglični ležajevi

Art.br 1.008.5400



**EXPERTtorque E680 L**

- rad bez vibracija (62 dB),
- optimalna snaga za sve preparacije 18W
- hlađenje sa četiri mlaznice, integrisani filter za vodu
- keramički KaVo kuglični ležajevi
- idealna kombinacija uglova (glava 100, koleno 19 stepeni) olakšava rad u teško pristupačnim područjima

E680 L | Art. br. 1.006.8700

**EXPERTtorque Mini LUX E677 L**

- turbina sa svetlom, mini glava, rad bez vibracija (62 dB)
- optimalna snaga za sve preparacije 15W
- idealna kombinacija uglova (glava 100, koleno 19 stepeni) olakšava rad u teško pristupačnim područjima
- hlađenje sa tri mlaznice, integrisani filter za vodu
- keramički KaVo kuglični ležajevi

E677 L | Art. br. 1.007.3600

**SMARTtorque****LUX S619 L sa svetlom 25000lux****LUX S619 C bez svetla**

- tiha (65 dB), bez vibracija
- snaga 16 W, 370.000 obr/min
- KaVo kuglični ležajevi
- KaVo pushbutton
- hlađenje sa 4 mlaznice

S619 L | Art. br. 1.008.1641

S619 C | Art. br. 1.008.1642

**SMARTtorque S 615 L**

- mini glava
- tiha (65 dB), bez vibracija
- snaga 12 W, 370.000 obr/min
- KaVo kuglični ležajevi
- KaVo pushbutton
- hlađenje sa 1 mlaznicom

S615 L | Mat. No. 1.008.1643

**SMARTtorque S609 C**

- priključak midvest crevo
- tiha (65 dB), bez vibracija
- snaga 16 W, 370.000 obr/min
- KaVo pushbutton, hlađenje sa 4 mlaznice

Art.br.1.008.1644

**SMARTtorque S605 C**

- mini glava
- priključak midvest crevo
- tiha (65 dB), bez vibracija
- snaga 15 W, 370.000 obr/min
- KaVo kuglični ležajevi
- KaVo pushbutton
- hlađenje sa 4 mlaznice

Art.br.1.008.1645







## Jednostavan pregled turbina



NAZIV	Seriya	Art.br.	Svetlo	Veličina glave - broj spreja	Snaga watt	Buka dB(A)	Kuplung
<b>MASTER SERIJA</b>							
MASTERtorque LUX	M9000 L	1.008.7900	Da	Standard - 4	23	57	KaVo MULTIflex
MASTERtorque LUX	M9000 LS	1.008.5400	Da	Standard - 4	19	57	Sirona*
MASTERtorque LUX (chocolate-brown)	M9000 L COLOR	1.007.9900	Da	Standard - 4	23	57	KaVo MULTIflex
MASTERtorque LUX (anthracite)	M9000 L COLOR	1.007.7100	Da	Standard - 4	23	57	KaVo MULTIflex
<b>EXPERT SERIJA</b>							
EXPERTtorque LUX	E680 L	1.006.8700	Da	Standard - 4	18	62	KaVo MULTIflex
EXPERTtorque	E680 C	1.006.9000	Ne	Standard - 4	18	62	KaVo MULTIflex
EXPERTtorque Mini LUX	E677 L	1.007.3600	Da	Mini - 3	15	65	KaVo MULTIflex
EXPERTtorque LUX	E680 LS	1.006.4600	Da	Standard - 4	16	62	Sirona*
EXPERTtorque LUX	E680 LN	1.006.4700	Da	Standard - 4	16	62	NSK PTL-CL*
EXPERTtorque Mini LUX	E677 LN	1.006.0100	Da	Mini - 3	16	65	NSK PTL-CL*
<b>SMART SERIJA</b>							
SMARTtorque LUX	S619 L	1.008.1641	Da	Standard - 4	16	65	KaVo MULTIflex
SMARTtorque	S619 C	1.008.1642	Ne	Standard - 4	16	65	KaVo MULTIflex
SMARTtorque Mini LUX	S615 L	1.008.1643	Da	Mini - 1	13	65	KaVo MULTIflex
SMARTtorque	S609 C	1.008.1644	Ne	Standard - 4	16	65	4-hole (Midwest)
SMARTtorque Mini	S605 C	1.008.1645	Ne	Mini - 1	13	65	4-hole (Midwest)



### MASTERmatic M25 L

- odličan ugao glave i tela kolenjaka 100/19 - crveni
- max.obrtaji 200.000 obr/min
- tih 55 dB
- promenljivi mikrofilter vode
- unutrašnji sprej
- keramički ležajevi

Art.br. 1.009.3630



### MASTERmatic LUX M20 L

- plavo telo 1:1
- sa svetlom - 25.000 LUX
- za standardne procedure kod uklanjanja karijesa
- maksimalna fleksibilnost kod tretmana sa mogućnošću promene 14 različitih glava
- kompatibilan sa svim INTRA LUKS glavama

Art.br 1.009.3620



### MASTERmatic LUX M10 L

- nasadnik sa svetlom 25.000 LUX
- max.obrtaja 40.000 obr/min
- mogućnost korišćenja borera za kolenjake i nasadnike
- prenos 1:1

Art.br. 1.009.3570



### MASTERmatic LUX M07 L

- zeleno telo 2,7:1
- sa svetlom - 25.000 LUX
- za karijes i profilaksu
- maksimalna fleksibilnost kod tretmana sa mogućnošću promene 14 različitih glava
- kompatibilan sa svim INTRA LUKS glavama

Art.br.1.009.3610





**EXPERTmatic E25 L**

- kolenjak Kavo crveni 1:5 sa svetlom
- max. obrtaji 200.000 obr/min
- sistem vadenja borera na dugme, unutrašnji sprej
- integrisani filter za vodu
- keramički ležajevi

Art.br 1.007.5550



**EXPERTmatic E20 L**

- kolenjak Kavo plavi 1:1 sa svetlom
- max.obrtaji 40.000 obr/min
- sistem vadenja borera na dugme, unutrašnji sprej
- usmerivač nečistoća i ojačan sistem stezanja

Art.br. 1.007.5540



**EXPERTmatic E15 L**

- kolenjak Kavo zeleni 5,4:1 sa svetlom
- max.obrtaja 7.500 obr/min
- sistem vadenja borera na dugme
- unutrašnji sprej

Art.br.1.007.5530



**EXPERTmatic E10 C**

- nasadnik KaVo 1:1
- max.obrtaja 40.000 obr/min
- ima unutrašnji sprej
- bez svetla

Art.br. 1.007.5560



**SMARTmatic S20S**

- Kolenjak 1:1 sa spoljnim sprejom
- Max. obrtaji 40.000 rpm obr/min:
- Sistem vadenja borera na dugme

Art.br. 1.011.6752



**SMARTmatic S10S**

- Nasadnik 1:1 sa spoljnim sprejom
- Max. obrtaji 40.000 rpm obr/min:
- Borere za nasadnike i kolenjake

Art.br. 1.011.6752





**Glava kolenjaka KaVo L68**

- glava 1:1
- sistem vađenja borera na dugme
- maksimalni obrtaji 40.000 obr/min

Art.br 1.008.1833



**Glava kolenjaka KaVo L67**

- zelena glava 2:1
- sistem vađenja borera na dugme
- maksimalni obrtaji 20.000 obr/min

Art.br 1.008.1832



**Glava kolenjaka KaVo L68 B**

- plava glava 1:1
- koristi borere za kolenjak 2,35 i instrumente za kanale
- sistem vađenja borera na dugme
- idealan za endodonciju u kombinaciji sa M20 L i 20LP na aparatima sa ENDO funkcijom
- obrtaji od 100 - 40.000 obr/min

Art.br 1.008.1834



**Glava kolenjaka KaVo L66 B**

- zelena glava 3:1
- koristi borere za kolenjak 2,35 i instrumente za kanale
- sistem vađenja borera na dugme
- idealan za endodonciju u kombinaciji sa M20 L i 20LP na aparatima sa ENDO funkcijom
- obrtaji od 35 - 13.300 obr/min

Art.br 1.008.1831



**KL 701**

- mikromotor sa svetlom
- trofazni bez četkica
- regulacija vode na crevu instrumenta
- brzina: 2.000-40.000 obr/min



**KL 703 LED**

- mikromotor sa LED svetlom 25.000lux
- trofazni bez četkica
- regulacija vode na crevu instrumenta
- endo funkcija
- brzina: 100-40.000 obr/min sa SMARTdrive motor control
- brzina: 2.000-40.000 obr/min
- 25% kraći, 30% lakši od KL701 motora



**Kavo Multiflex 465 LED**

- adapter sa LED svetlom
- sa regulacijom vode



**Kavo Multiflex 465 LRN**

- adapter sa svetlom
- sa regulacijom vode



**Kavo Multiflex 465 RN**

- adapter bez svetla
- sa regulacijom vode



**Kavo Multiflex 460 LE**

- adapter sa svetlom
- bez regulacije vode



**Kavo Multiflex 460 E**

- adapter bez svetla
- bez regulacije vode

MULTIflex kuplung

Naziv	Art.br	Svetlo	Sprej	Konektor
MULTIflex LUX 465 LED	1.007.3197	LED	Regulacija spreja	Midvest konekcija
MULTIflex LUX 465 LRN	0.553.1550	Halogeno	Regulacija spreja	Midvest konekcija
MULTIflex LUX 460LE	1.001.7599	Halogeno	Ne	Midvest konekcija
MULTIflex 465 RN	0.553.1600	Ne	Regulacija spreja	Midvest konekcija
MULTIflex LUX 460E	1.001.7600	Ne	Ne	Midvest konekcija



## PROPHYflex 3 2018

- Instrument za uklanjanje mekih naslaga



**Blistavo i čisto - vrlo jednostavno, profesionalno, fokusirano i nežno čišćenje zuba!**

Uklanjanje mekih naslaga, biofilma i mrlja, čišćenje fisura pre zalivanja, prevencija od karijesa. Primena u ortodontiji - čišćenja proteza, površina zuba pre nanošenja lepka. KaVo PROPHYflex perio nastavak - za subgingivalne tretmane, uklanja biofilm u džepovima, čisti implantate

## KaVo SONICflex 2000N

- skidač kamenca

- Pneumatski, konekcija na KaVo MULTIflex - kuplung
- Bez svetla
- Frekvencija: 6 kHz
- 1 amplituda - 160µm
- Pravac kretanja : elipsasto
- 1 x SONICflex nastavak 5 (univerzalni)
- 1 x sila ključ za stezanje nastavaka

Art.br.0.5710.5020



## KaVo SONICflex 2003 - skidač kamenca

Vaš moćan univerzalni instrument! Pneumatski skidač kamenca KaVo SONICflex karakteriše najširi spektar upotrebe u mikrostomatologiji, od profilakse do mikrohirurgije. Odaberite svoje SONICflex nastavke!

- Pneumatski, na KaVo MULTIflex - kuplung
- Frekvencija: 6 kHz
- 3 amplitude rada (3 performanse) - 120µm, 160µm, 240µm
- Pravac kretanja: elipsasto
- Svetlosni, veoma tih
- Veliki broj nastavaka, široko polje rada

SONICflex LUX Set 2003 L | Art.br. 1.000.8333

SONICflex LUX 2003 L | Art.br. 1.000.4243

SONICflex Set 2003 (bez svetla) | Art.br. 1.000.8334

SONICflex 2003 (bez svetla) | Art.br. 1.000.4246



## SONICflex 2008 quick

- Brzo postavljanje vrhova QUICK sistem
- Pneumatski, konekcija na KaVo MULTIflex - kuplung
- Frekvencija: 6 kHz
- 3 amplitude - nivoa 120µm, 160µm, 240µm
- Pravac kretanja : elipsasto
- Svetlosni
- Veoma tih







### PROPHYpearls

Supragingivalni - prah za sigurno uklanjanje mekih naslaga - kalcijum karbonat

Ukusi: neutralni  
Pakovanje: 80 kesica po 15 grama



### PROPHYflex prah

Supragingivalni - za uklanjanje mekih naslaga - natrijum bikarbonat

Ukusi: menta, neutralni, pomorandža, crna ribizla  
Pakovanje: 80 kesica po 15 grama

380.00

## AIRFLOW®

Uklanja biofilm, mrlje, koloracije i kamenac na prirodnim zubima, restauracijama i implantatima. Čisti i polira u jednom postupku.



Eliminiše glavni etiološki uzrok oboljenja zuba, gingivitisa, parodontitisa, mukozitisa i peri-implantitisa. Koristeći Erithritol PLUS prašak, Airflow supragingivalni aparat može ukloniti Biofilm u sulkusnom području i plitkim džepovima do 4mm, na jeziku i gingivi, kao i na palatumu - sve na minimalno invanzivan način za maksimalnu udobnost pacijenta.

### Sa gumicama i polirnom pastom nemoguće je očistiti:

- Interdentalne prostore, naročito kod pacijenata sa preklopljenim zubima
- izložene vratove zuba
- Jame i pukotine
- Ortodontske bravice

## AIR-FLOW MASTER®

### PRVI SUB I SUPRAGINGIVALNI APARAT ZA PROFILAKSU U SVETU



- 2 sistema aplikacije sub i supra - gingivalno
- 2 komore
- 2 radna modula
- 2 ORIGINALNA Instrumenta sa odličnim performansama za svaki klinički tretman: AIRFLOW® Instrument, PERIOFLOW® Instrument
- 3 komande na dodir za jednostavnu manipulaciju i perfektnu higijenu



## AIR-FLOW MASTER PIEZON®

### TRI TEHNOLOGIJE, JEDAN APARAT

Višefunkcionalni i fleksibilni: AIRFLOW® Master Piezon kombinuje tri originalne AIRFLOW®, PERIOFLOW® i PIEZON® tehnologije za potpunu vođenu terapiju biofilma (GBT). Uređaj ima i ugrađeni sistem za čišćenje zajedno sa integrisanom tehnologijom grejanja koja održava temperaturu vode na 37 ° C.

- 2 sistema aplikacije sub i supra - gingivalno
- Inteligentna BEZBOLNA tehnologija
- 3 komande na dodir za jednostavnu manipulaciju i perfektnu higijenu
- 3 ORIGINALNA Instrumenta sa odličnim performansima za svaki klinički tretman.



## AIR-FLOW® S1

### VAŠ KLASIČAN APARAT ZA PROFILAKSU PROFESIONALNO PESKARENJE I OTKLANJANJE PLAKA I PIGMENTACIJE

**Bezvremeni uređaj:** računajte na AIR-FLOW® S1 za efikasan tretman i sigurno uklanjanje mekih naslaga i pigmentacija u fisurama i interdentalnim prostorima.



## AIR-FLOW® S2

### KLASIČAN AIR-FLOW® I PIEZON® TREATMAN: DVE TEHNOLOGIJE - JEDAN RADNI PROCES

Posebno je namenjen za biofilm, mrlje, uklanjanje mekih naslaga i uklanjanje kamenca, naročito u teško dostupnim područjima, interdentalnim prostorima i fisurama. Ima višefunkcionalnu pedal i zagrejan vodeni mlaz - idealno za preosetljive pacijente i decu. Zahvaljujući PIEZON® ultrazvučnom modulu, AIR-FLOW® S2 može obezbediti precizne linearne oscilacije bez lateralne defleksije, što dovodi do veće preciznosti i predvidljivih kliničkih ishoda.



## (PREMIUM, PLUS I PERIO)



### ORIGINALNA AIRFLOW® TERAPIJA SA NOVIM STANDARDOM U EFIKASNOSTI I FLEKSIBILNOSTI, ERGONOMIJI I DIZAJNU

Mobilni i fleksibilni: AIR-FLOW® HANDY 3.0 PREMIUM je proizvod najviše tehnologije, sa elegantnim dizajnom i laganim telom za optimalan komfor i rukovanje. Kao plod istraživačkog centra EMS-a u Švajcarskoj i prvim uređajem ove vrste, može se brzo integrisati u bilo koju stomatološku stolicu i zadovoljiti najstrožije zahteve savremenog profesionalnog čišćenja zuba nad čitavim spektrom sub i supragingivalnim tretmana.

### AIR-FLOW® handy 3.0 PERIO - Premium

Za vrhunsku profilaksu - uvek spremni za sub i supragingivalnu upotrebu sa dva dokazana nastavka i AIR-FLOW® prahom PLUS i PERIO.

### AIR-FLOW® handy 3.0 PERIO - Plus

Optimalan za upotrebu u parodontalnim džepovima dubine do 4 mm i preko čitave površine zuba, kao i za uklanjanje mrlja - fleksibilno i efikasno sa AIR-FLOW® prahom PLUS.

### AIR-FLOW® handy 3.0 PERIO - Perio

Za optimalnu subgingivalnu upotrebu u džepovima dubljim od 4 mm - jednostavno i temeljno uklanjanje biofilma sa AIR-FLOW® prahom PLUS i PERIO.

## AIR-FLOW® HANDY 2+

### Savršen balans na vašim prstima

Inovativni dizajn zadovoljava švajcarsku preciznost: AIR-FLOW® HANDY 2+ predstavlja klasični sistem mobilnog uređaja: Specijalno je dizajniran za prah sa veličinom zrna od 40µm, efikasno uklanja biofilm, mrlje i druge delimično mineralizovane naslage u teško dostupnim oblastima. Pored profilakse, AIR-FLOW® HANDY 2+ ima širok spektar kliničkih primena, od ortodontske nege do održavanja implantata. Ručni uređaj, jednostavan i intuitivan dizajn za veću pouzdanost i ergonomiju, odlikuje se preciznim sprejom i 360° rotirajućim vrhom. Ovaj uređaj je osvojio prestižnu nagradu Red Dot Design za dizajn i inovacije u oblasti nauke i medicine.







## AIR-FLOW® PRAH CLASSIC AIR-FLOW® PRAH CLASSIC COMFORT

Prah CLASSIC natrijum bikarbonata upravo je unapređen novom formulom: CLASSIC COMFORT. Granulometrijska veličina je smanjena za skoro 40% za maksimalnu udobnost pacijenta, kreće se od 65 μm do 40 μm. Ugodno je, ukusno i jednako delotvorno u uklanjanju biofilma, mrlja, teške pigmentacije i ranih kalkifikata. Zahvaljujući smanjenoj veličini zrna i različitim ukusima, profilaksa je upravo postala ukusnija - **probajte, pacijenti ga vole!** Pakovanje CLASSIC 300 gr. / CLASSIC COMFORT 250 gr.



### AIR-FLOW® POWDER SOFT

Idealan prah za pacijente koji pate od osetljivosti zuba. Savršen za decu, ima prijatan slatki ukus, uklanja biofilm i zubne naslage. Veličina zrna 65 μm. Pakovanje 200 gr.

### AIR-FLOW® POWDER PLUS

Prvi visokotehnološki prah koji uklanja biofilm i kamenac na minimalno invazivan način sa svih vrsta površina: gleđ, dentin, meko tkivo, restauracije, ortodontski uređaji ili površine implantata. Molekul baziran na Eritritolu (Erythritol) daje jedinstvenu indikaciju za supra-gingivalnu i subgingivalnu upotrebu. PLUS prašak sadrži hloreksidin što ga čini jedinstvenim prahom sa anti-mikrobnim i anti-bakterijskim svojstvima. Veličina zrna ~14 μm. Pakovanje 100 gr.

### AIR-FLOW® POWDER PERIO

Prah PERIO obeležio je sam početak subgingivalnih tretmana. Veličina zrna 25 μm. Pakovanje 120 gr.

## ORIGINALNI PIEZON® LED INSTRUMENT

Paleta proizvoda PIEZON našim kupcima donosi neuporediv ultrazvučni kvalitet, nove nivoe spretnosti, brzine u oscilaciji koje redefinišu industrijske standarde i šta više: sve sa minimalno-invazivnom sposobnošću. U srcu ovog vodećeg instrumenta na tržištu je najsavremenija piezokeramička disk tehnologija koja, u kombinaciji sa inovativnim modulom PIEZON NO-PAIN, znači da svi PIEZON-ovi uređaji mogu doneti neprekidne nivoe preciznosti i linearnih oscilacija.

### KARAKTERISTIKE – PREDNOSTI PROIZVODA

- Unikatni dizajn, niska buka i male vibracije za poboljšanu udobnost korisnika i lakšu upotrebu.
- Šest trajnih, ugrađenih 5.000 Kelvin LED dioda
- 5.000 Kelvina da se obezbedi prirodno dnevno svetlo za bolju dijagnozu
- Automatsko uključivanje / isključivanje LED-a pri izbacivanju i odlaganju nastavka
- Optimalni prečnik i ergonomski dizajn za aparat u formi olovke
- Tačnost, kontrola i eliminacija tačaka pritiska
- Lagan i dobro izbalansiran da smanji umor ruke
- Tanak nosač za bolju vidljivost i pristupačnost
- Telo medicinskog kvaliteta za visoku izdržljivost
- Inovativni svetlosni vodič mikro-objektivom za poboljšanje svetlosnog fokusa
- Termodezinficirajući i sterilizabilni



## PIEZON® NO PAIN BUILT-IN KIT

### DINAMICAN I EFIKASAN TRETMAN

Modul PIEZON® NO PAIN je vrhunski standard kada su u pitanju ultrazvučna rešenja za skaliranje, kombinovanje efikasnosti i optimalne udobnosti pacijenta. PIEZON® NO PAIN - Ugrađeni komplet može biti integrisan u svaku stomatološku stolicu i dostupan je i uz PIEZON® I PIEZON®LED instrumente. Ima sistem visoko preciznog upravljanja snagom i podržava brojne aplikacije kao što su skaliranje, parodontalna, endodontska i restaurativna terapija i kompatibilan je sa svim EMS instrumentima.





## PIEZON® MASTER 700

### VAŠ KOMPLETNI ULTRASONIČNI UREĐAJ

PIEZON® Master 700 obezbeđuje brzo, profesionalno i minimalno invazivno uklanjanje kamenca, eliminiše biofilm i druge mineralizovane naslage zahvaljujući svojim efektima kavitacije i akustičnog strujanja. Uređaj ima integrisani sistem grejanja vode, multifunkcionalnu pedal i interfejs sa dodirnim panelom, sa plavim LED diodama, za regulisanje snage i vode. RED DOT nagrada za dizajn i automatsku funkciju čišćenja.



### DVE VERZIJE UREĐAJA - PREMIUM I STANDARD



## Fiziodispenzer Kavo MASTERsurg LUX

- Bežična nožna pedala
- Tač displej, svetlosni LCD displej u boji, automatska kalibracija,
- Rotacije motora levo / desno, do 10 programa, svaka sa 10 programskih mogućnosti, najbolje performanse svetla u svetu - S600 LED, minimalna vibracija.
- Maksimalni tork : 80 Ncm
- Brzina: 0 - 40.000 obr/min
- Performansi pumpe 0-110 ml / min
- Bežična nožna pedala



## Fiziodispenzer Kavo EXPERTsurg LUX

- Svetlosni LCD displej u boji, automatska kalibracija, rotacije motora levo / desno, do 10 programa, svaka sa 10 programskih mogućnosti, najbolje performanse svetla u svetu - S600 LED, minimalna vibracija
- Maksimalni tork : 80 Ncm
- Brzina: 0 - 40.000 obr/min
- Performansi pumpe 0-110 ml / min



## PIEZON® 250

### KADA SE JEDNOSTAVNOST SRETNE SA ELEGANCIJOM

Povećajte produktivnost i zadovoljstvo pacijenta: PIEZON® 250 je stomatološka jedinica za profesionalno uklanjanje kamenca. Njegova kompaktna forma zauzima manje prostora. Zahvaljujući tankom, snažnom i laganom PIEZON-u, možete ukloniti kamenac i druge mineralizovane naslage sa superiornom efikasnošću i udobnošću. Šest LED dioda nalazi se oko vrha držača. Linearne vibracije oscilatornog pokreta instrumenta obezbeđuju precizni tretman za pouzdane kliničke ishode.




## PIEZON® 150

### KOMPAKTAN I LAK ZA UPOTREBU

PIEZON® 150 je prvi u svojoj klasi kada su u pitanju uređaji za direktnu vodenu liniju. Nosi standardni PIEZON® modul sa ultrazvučnim performansama od 32.000 linearnih oscilacija u sekundi, pružajući efikasno uklanjanje kamenca i maksimalnu preciznost. Ima kompaktni dizajn, sa intuitivnim interfejsom za kontrolu snage. Opremljen sa šest LED dioda koji pružaju kvalitet dnevne svetlosti, PM 150 je idealan za teško dostupne regije i džepove.



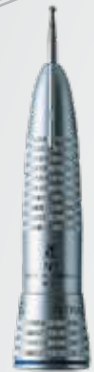

### Nasadnik KaVo hiruški 3610 N1

- Redukcija: 1:1
- Spoljašnje hlađenje
- Max. brzina: 40.000 obr/min
- Max. torque: 10 Ncm



### Nasadnik KaVo hiruški 3610 N2

- Redukcija: 1:1
- Spoljašnje hlađenje
- Dužina borera: 62,5 mm (može se koristiti i 44,5 mm)
- Može se lako rastaviti radi čišćenja
- Max. brzina: 40.000 obr/min
- Max. torque: 10 Ncm



### Nasadnik KaVo hiruški 3610 N3

- Redukcija: 1:1
- Spoljašnje hlađenje: dodatak za sprej
- Dužina borera: 70 mm
- Može se lako rastaviti radi čišćenja
- Ojačana stezna čaura
- Max. brzina: 40.000 obr/min
- Max. torque: 10 Ncm



### KaVo SURGmatic S201 L

- sa svetlom

- Redukcija 20 : 1
- Glava i telo kolenjaka su razdvojni za lako čišćenje
- EKSPERTgrip za bolje prijanjanje i higijenu
- Mala glava sa unutrašnjim sistemom ispiranja
- Spoljašnje hlađenje sa konektorom na glavi sa svetlom



### Nasadnik KaVo SURGmatic S11 L

- sa svetlom

- Redukcija: 1:1
- Svetlosni
- Spoljašnje hlađenje
- Max. brzina: 40.000 obr/min
- Max. torque: 5.5 Ncm

## QUATTROcare PLUS 2124 A

- aparat za čišćenje i podmazivanje instrumenata

KaVo QUATTROcare PLUS Vam nudi maksimalno brz i jednostavan način upotrebe. Podmazivanje četiri nasadna instrumenta u samo jednom minutu! Nakon postavljanja instrumenata i pritiska na komandu sve ostalo se odvija automatski!



### KaVo QUATTROcare plus sprej

za mašinsko čišćenje instrumenata



### KaVo sprej

za ručno čišćenje instrumenata

## Dekaseptol Gel


Gel za dezinfekciju i čišćenje creva saugera i sisaljki, odvodnih creva fontana i samih fontana. Spektr delovanja: uspešno deluje protiv velikog spektra patogenih bakterija (uključujući i TBC) viruse (hepatitis B i HIV) adenoviruse i funge

- ekološki proizvod bio razgradiv- ne sadrži aldehide, fenole i hlor
- upotreba bez mešanja, štedi vreme, potrebna doza na pritisak dozera, a gel je aktivan momentalno



## Oxygenal 6

Voda u stomatološkim sistemima može postati zaražena mikroorganizmima. Zato se KaVo od 1986. oslanja na hidrogen peroksid, čiji efekat je sinergetski pojačan jonima srebra. Brojni testovi i laboratorijska ispitivanja su pokazala kompatibilnost ovih materijala. Koncentracija prilikom aplikacije ne predstavlja opasnost za pacijente i osoblje i razlaže se bez ostataka na vodu i kiseonik.

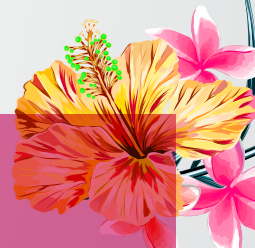





DAL 1948: ESPERIENZA  
E RINNOVAMENTO

## STERILIZACIJA FARO - SIGURNOST U VAŠOJ ORDINACIJI

Bezbedni ciklus sterilizacije  
je važan u svakom segmentu  
stomatologije!



### Autoklav Faro SK07 - klasa B

- Integriran printer -Uredaji za štampanje ili čuvanje podataka smešteni su unutar donjih vrata.
- Tri police
- Četiri ciklusa: B134C Standard, 134 C Prion, 134 C B brzi, 121 C Standard
- Četiri Test ciklusa: 134 C Helix Test, 121 C Helix Test, Vakum Test, Bowie & Dick
- Zapremina rezervoara vode 3.65 l
- Dimenzije 16 l: 690 x 450 x 489mm
- Dimenzije 21 l: 790 x 450 x 489mm
- Integriran printer
- Snimate ciklus pomoću specifičnog integrisanog softvera
- GARANCIJA 24 MESECA



Traka za kontrolu  
sterilizacije u autoklavu  
19mmx50m

400,00



Posuda za hladnu  
sterilizaciju 1l

2.530,00



Rolna za sterilizaciju  
od 50 do 250 X 200 m

(od 1.320,00 do  
6.280,00)



Samolepljive kese za sterilizaciju  
90x230 i 140 x 250 - 200 kom

1.420,00 / 2.020,00

### Destilator Dropy S

- Max. količina vode 3l
- Proizvede 3l destilovane vode do 5 sati
- 6 filtera
- Bokal 4l

### Aparat za pakovanje instrumenata SL13- FARO

Ergonomski i praktičan dizajn, visoke performanse,  
vrhunska

tehnologija! SL13 je namenjena za pakovanje  
instrumenata za sterilizaciju autoklaviranjem i pogodan  
je za dnevne potrebe u medicinskoj oblasti. Ekonomični  
grejač sa elektronskom kontrolom. Ima ugrađen uređaj  
za zaštitu od pregrevanja i automatsku uštedu energije.  
Može raditi sa papirom i polipropilenskim filmom.  
Garantovano će održati performanse za sterilizaciju

### Aparat za pakovanje instrumenata SELLA 2- FARO

Atraktivna , stabilna i jednostavna za  
rukovanje!

Namenjena za pakovanje instrumenata  
za sterilizaciju autoklaviranjem. PK ploča  
sa automatskom kontrolom temperature,  
dvosmerna ručka i zvučni signal  
statusa grejača. Telo od aluminijumske  
legure koje se lako održava, dolazi sa  
integriranim sečivom sa garancijom za  
100.000 sečenja.

### Ultrazvučna kadica

- Za pranje borera i instrumenata pre sterilizacije

### Separator MINI-SEPARATOR

Ovo je verzija koja se instalira unutar  
stomatološke jedinice.

Sastoji se od: mini separatora, odvodne jedinice,  
AC 45 P.B., Ø 25 ravnih držača cevi, Ø 30 ravnih  
držača cevi, Ø 25 savijenog držača cevi, Ø 30  
savijenog držača cevi.

Kanister V = 195 mm D = 135 mm H = 340 mm





SAUGERI ZA STOMATOLOŠKU PRAKSU - Perfektna snaga  
sukcije Durr Dentala



Moćni suvi i vlažni sistemi sukcije!



**Sauger Durr V300S**

- Koristi se za jedno radno mesto
- Separator kondenzata
- Kontrolna elektronika
- Napajanje: 230V 1~, 50-60Hz
- Struja: 2,9-3,7A
- Snaga motora: 0,58-0,8 kW
- Obrtaja: 2.850 (rpm)
- Vakum: 180 mbar
- Buka: 63-65 dB, sa kućištem 54-56 dB
- Dimenzije: H 37 x W 31 x D 31 cm (bez kolektora kondenzata)
- H 43 x W 38 x D 43 cm (sa kolektorom kondenzata)
- H 51 x W 36 x D 36 cm (sa kućištem)



**Sauger Durr VS600 - vlažni**

- Koristi se za dva + jedno radno mesto
- Kontrolna elektronika
- Napajanje: 230V 1~, 50-60Hz
- Struja: 5,0 A / 1,8-4 A
- Snaga motora: 1,1 kW
- Obrtaja: 2.850 (rpm)
- Vakum: 170 mbar
- Max. usisavanje tečnosti: 10 l/min
- Buka: 63 dB, sa kućištem 55 dB
- Dimenzije: H 50 x W 42 x D 41 cm (bez kućišta)
- H 50 x W 49 x D 53 cm (sa kućištem)



**Sauger Durr VS300S - vlažni**

- Koristi se za jedno radno mesto
- Kontrolna elektronika
- Napajanje: 230V 1~, 50-60Hz
- Struja: 2,9-3,7A
- Snaga motora: 0,58-0,8 kW
- Obrtaja: 2.850 (rpm)
- Vakum: 180 mbar
- Max. usisavanje tečnosti: 4 l/min
- Buka: 63-65 dB, sa kućištem 54-56 dB
- Dimenzije: H 37 x W 31 x D 31 cm (bez kućišta)
- H 51 x W 36 x D 36 cm (sa kućištem)



**Sauger Durr V900**

- Koristi se za tri + dva radna mesta
- Separator kondenzata
- Kontrolna elektronika
- Napajanje: 230V 1~, 50-60Hz
- Struja: 6,5 A
- Snaga motora: 1,48 kW
- Obrtaja: 2.850 (rpm)
- Vakum: 170 mbar
- Buka: 64 dB, sa kućištem 58 dB
- Dimenzije: H 55 x W 42 x D 41 cm (bez kolektora kondenzata)
- H 57 x W 62 x D 41 cm (sa kolektorom kondenzata)
- H 55 x W 49 x D 53 cm (sa kućištem)




**Sauger Durr V600**

- Koristi se za dva + jedno radno mesto
- Separator kondenzata
- Kontrolna elektronika
- Napajanje: 230V 1~, 50-60Hz
- Struja: 5,0 A / 1,8-4 A
- Snaga motora: 1,1 kW
- Obrtaja: 2.850 (rpm)
- Vakum: 170 mbar
- Buka: 63 dB, sa kućištem 55 dB
- Dimenzije: H 50 x W 42 x D 41 cm (bez kolektora kondenzata)
- H 57 x W 62 x D 41 cm (sa kolektorom kondenzata)
- H 50 x W 49 x D 53 cm (sa kućištem)



**Sauger Durr VS900 - vlažni**

- Koristi se za tri + dva radna mesta
- Kontrolna elektronika
- Napajanje: 230V 1~/ 400V 3~
- Struja: 7,6 A / 3,7-6,2 A
- Snaga motora: 1,8 kW / 1,9 kW
- Obrtaja: 2.850 (rpm)
- Vakum: 170 mbar
- Max. usisavanje tečnosti: 16 l/min
- Buka: 64 dB, sa kućištem 58 dB
- Dimenzije: H 52 x W 41 x D 42 cm (bez kućišta)
- H 55 x W 49 x D 53 cm (sa kućištem)
- Težina: 34 kg, sa kućištem 52 kg

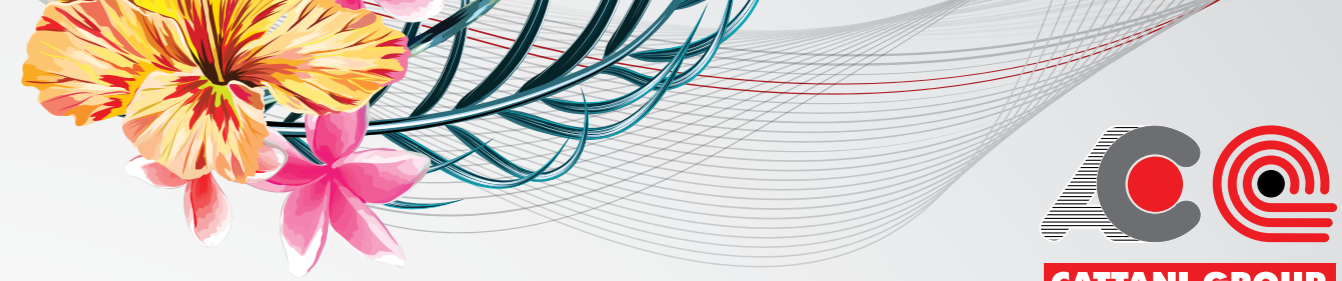

SAUGERI MONO-JET ALPHA I MONO JET BETA  
(VLAŽNI, JEDNO RADNO MESTO)



- Koristi se za jedno radno mesto
- Kontrolna elektronika, 24V kontrola saugera
- Automatska drenaža sa automatskim stopiranjem motora
- Pumpa za pražnjenje drenažne posude
- Kućište metalno
- Uz sauger se isporučuje crevo odvoda 1,5m i crevo sukcije 2m
- Snaga motora: 0,4 kW - 3,1 A
- Max. protok: 1250 l/min
- Buka: 59 dB
- Dimenzije: W=520mm D=285mm H=440mm

SAUGER UNI-JET 75  
SA KUTIJOM (SUVI, JEDNO RADNO MESTO)



- Kontrolna elektronska ploča
- Motor: 0,4 kW, 3,1A
- Protok: 1250 l/min
- Vakum: 130 mbar
- Buka: 58 dB
- Dimenzije: W=315mm D=280mm H=330mm

SAUGER TURBO-SMART  
(VLAŽNI, A VERZIJA)



- Koristi se za dva radna mesta
- Mogućnost proširenja na 3/4 radna mesta
- Kontrolna elektronika, 24V kontrola saugera
- Automatska drenaža sa automatskim stopiranjem motora
- Snaga motora: 1,22 kW - 7 A
- Max. protok: 1400 l/min
- Buka: 68,2 dB
- Dimenzije: W=400mm D=355mm H=650mm







## KOMPRESORI DÜRR DENTAL

- Srce vaše ordinacije

Snažni, pouzdani i suviše lepi za podrum.

### Kompresor Durr Tornado 1



- Kompresor za jedno radno mesto (bezuljni bez sušača)
- Cilindar: 1kom
- Napajanje: 220V, 50Hz
- Protok vazduha pri 5 bara : 67 l/min
- Zapremina boce: 20l
- Pritisak sklopke: 6-7,8 bar
- Buka pri 5 bara: 64 dB
- Dimenzije: H 66 x W 48 x D 37cm

### Kompresor Durr Tornado 1 (sa sušačem)



- Kompresor za jedno radno mesto (bezuljni sa membranskim sušačem)
- Cilindar: 1kom
- Napajanje: 220V, 50Hz
- Protok vazduha pri 5 bara: 60 l/min
- Zapremina boce: 20l
- Pritisak sklopke: 6-7,8 bar
- Buka pri 5 bara: 64 dB
- Dimenzije: H 66 x W 49 x D 43 cm



### Kompresor Durr Tornado 2

- Kompresor za 1-2 radna mesta (bezuljni bez sušača)
- Cilindar: 1kom
- Napajanje: 220V, 50Hz
- Protok vazduha pri 5 bara : 124 l/min
- Zapremina boce: 20l
- Pritisak sklopke: 6-7,8 bar
- Buka pri 5 bara: 68 dB
- Dimenzije: H 64 x W 48 x D 37cm

### Kompresor Durr TRIO (sa sušačem)



- Cilindar: 3 kom , bezuljni
- Napajanje: 220V, 50Hz
- Protok vazduha pri 5 bara : 160 l/min
- Zapremina boce: 50l
- Pritisak sklopke: 6-7,8 bar
- Buka pri 5 bara: 69 dB
- Dimenzije: H 76 x W 74 x D 52 cm



### Kompresor Durr Tornado 2 (sa sušačem)

- Kompresor za 1-2 radna mesta (sa membranskim sušačem)
- Cilindar: 2 kom
- Napajanje: 220V, 50Hz
- Protok vazduha pri 5 bara : 110 l/min
- Zapremina boce: 20l
- Pritisak sklopke: 6-7,8 bar
- Buka pri 5 bara: 68 dB
- Dimenzije: H 64 x W 49 x D 43 cm

### Kompresor Durr Duo Tandem 2 (dva agregata i sušač)



- Opslužuje 3 radna mesta
- Agregat: 2 kom
- Cilindar: 4 kom , bezuljni
- Napajanje: 400V, 50-60Hz
- Protok vazduha pri 5 bara : 230 l/min
- Zapremina boce: 50l
- Pritisak sklopke: 6-7,8 bar
- Buka pri 5 bara: 69 dB
- Buka u orig.ormanu: 54 dB
- Dimenzije: H 76 x W 79 x D 52 cm

### Kompresor Durr Duo Tandem 2 (jedan agregat i sušač)

- Opslužuje 2 radna mesta
- Cilindar: 2 kom , bezuljni
- Napajanje: 400V, 50-60Hz
- Protok vazduha pri 5 bara : 115 l/min
- Zapremina boce: 50l
- Pritisak sklopke: 6-7,8 bar
- Buka pri 5 bara: 68 dB
- Dimenzije: H 76 x W 79 x D 52 cm
- Težina: 64 kg



### Kompresor Cattani AC200 (dva cilindra i sušač)

- Jedan motor 230V 50Hz 1,2 kW - 7,7A
- Protok vazduha pri opterećenju od 5 bara 160 l/min
- Zapremina boce: 30 litara
- Sušač
- Buka: 70 dB
- Dimenzije: W=620 mm D=460 mm H=720 mm

### Kompresor Cattani AC300 (tri cilindra sa sušačem)

- Zapremina boce: 45 litara
- Tri cilindra
- Sušač vazduha
- Hladnjak
- Jedan motor 230V 50Hz 1,5 kW - 10,2A
- Protok vazduha pri opterećenju od 5 bara 238 l/min
- Buka: 73,6 dB
- Dimenzije: W=580 mm D=600 mm H=940 mm
- -izlaz 3/8";



### Kompresor 24/150V

- Zapremina boce 24 l
- Sva cilindra
- Protok vazduha od 125 l/min pri opterećenju od 5 bara u boci (1-2 radna mesta)
- Buka <65 dB
- 230/50Hz, 1,1kW
- Dimenzije: 61x41x43 cm

### Kompresor 50/230V

- Zapremina boce 50 l
- Dva cilindra
- Protok vazduha od 180 l/min pri opterećenju od 5 bara u boci (tri radna mesta)
- Buka <68 dB
- 220V / 50Hz, 1,5 kW
- Dim 46x52x92 cm

### Kompresor 50/230V sa sušačem

- Zapremina boce 50 l
- Dva cilindra
- Protok vazduha od 180 l/min pri opterećenju od 5 bara u boci (tri radna mesta)
- Buka <68 dB
- 220V / 50Hz, 1,5kW
- Dim 46x52x92 cm



\* postoje i drugi modeli kompresora u našoj ponudi!





## LEICA M 320

Većim i bržim protokom informacija u stomatologiji se pojavila potreba za većim očekivanjima od stomatologa, a istovremeno se pružila mogućnost dokumentovanja ili razmene snimka toka procedure.

**Leica M320** opciono ima integrisanu full HD kameru sa mogućnošću snimanja i kreiranja slike do 10 mega piksela, kao i video snimka u punom HD kvalitetu.

Šta čini dentalni mikroskop **Leica** vrhunskim uređajem:

- **Leica optika:** nova paradigma posmatranja
- **Leica led osvetljenje:** globalna novina u svetu medicine
- **Leica Full HD tehnologija slike:** reper za čuvanje i razmenu slike
- **Leica ergonomija:** veća efikasnost uz praktičnost
- **Leica dizajn:** estetika, higijena, inovacija, prefinjenost

**Sve to je vaš dentalni mikroskop Leica!**



## LEICA M 320 High end

- Produžna ruka na polužju  $\pm 155^\circ$
- Nosač mikroskopa na produžnoj ruci
- Bočni nosač mikroskopa-pokret  $\pm 60^\circ$
- Full HD i foto kamera
- Binokularni tubus sa varijacijom od  $0^\circ$  do  $180^\circ$
- Okulari 12,5 x
- Fini objektiv f = 250 mm
- Narandžasti fokusiran filter
- Direktno i dugotrajno 2-LED osvetljenje, Prosečni životni vek od 60.000 sati za doživotni rad; klasa 1 LED Proizvod
- 5 zaštitnih naočara
- 1 video kabal HDMI 10 metara, USB kabal 3 metara,
- IR daljinski upravljač za integrisanu video kameru, sve postavke kamere sa podešavanjima na ekranu

**Multifoc** objektiv omogućava radno polje na razdaljini od 200 mm do 300 mm, brzo i lako fokusiranje. Sa Multifoc objektivom nema potrebe od repozicioniranje položaja mikroskopa za vreme rada.





# TEHNODENT

## NOVO IME ZA SIGURNOST !

Leica

vatech

KAVO  
Dental Excellence

EMS<sup>+</sup>



FARO

DAL 1948: ESPERIENZA  
E RINNOVAMENTO

DÜRR  
DENTAL

EUROCOMPRESS<sup>®</sup>

CATTANI GROUP

Cena je ono što plaćate. Vrednost je ono što dobijate!

**ZATO ODABERITE TEHNODENT - MI SMO VAŠ  
POUZDAN PARTNER!**

VOCO  
THE DENTALISTS

DENTAL  
MARKET

DMP LTD

ULTRADENT  
PRODUCTS, INC.

f Tehnodent Novi Sad

Rakovačka 7, 21000 Novi Sad  
Tel.: +381 21 6432 183 | +381 21 6431 906

Nebojšina 33, 11000 Beograd  
Tel.: +381 11 3981 823 | +381 11 3981 837



TEHNODENT

www.sakota.biz